



# *Printer Driver*

---

## Guide d'installation

Ce guide décrit l'installation du pilote d'imprimante pour Windows Vista et Windows XP.

### **Avant d'utiliser ce logiciel**

Avant d'utiliser le pilote d'imprimante, assurez-vous d'avoir lu le fichier « ReadMe ».

## UP-GR700

---

# Table des matières

<b>Conditions nécessaires pour l'opération .....</b>	<b>3</b>
<b>A propos de ce document .....</b>	<b>3</b>
<b>Installation du pilote d'imprimante dans Windows</b>	
<b>Vista .....</b>	<b>4</b>
Avant l'installation .....	4
Installation dans Windows Vista .....	4
Désinstallation du pilote d'imprimante dans	
Windows Vista .....	7
Configuration de l'imprimante dans	
Windows Vista .....	9
<b>Installation du pilote d'imprimante dans</b>	
<b>Windows XP .....</b>	<b>11</b>
Avant l'installation .....	11
Installation dans Windows XP .....	12
Désinstallation du pilote d'imprimante dans	
Windows XP .....	14
Configuration de l'imprimante dans	
Windows XP .....	15
<b>A propos de la zone d'impression .....</b>	<b>17</b>
Impression d'une image .....	17
Impression de deux images .....	17
Impression de trois images .....	18

Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation. Les autres noms de société et de produit qui apparaissent dans ce guide sont également des marques commerciales ou des marques commerciales déposées.

---

## Conditions nécessaires pour l'opération

Les pré-requis du système pour l'utilisation du pilote d'imprimante sont les suivants.

- Ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows Vista (Edition 64 bits non compatible)
- ou
- Ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows XP Professionnel/Edition Familiale

### A propos de USB 2.0

- L'imprimante UP-GR700 est conforme aux spécifications USB 2.0.
- USB 2.0 est tout entièrement compatible avec USB 1.1.
- USB 2.0 prend en charge les opérations à pleine (faible) vitesse et à grande vitesse.
- La connexion et l'opération à pleine vitesse sont possibles dans un environnement USB 1.1. Pour l'opération à grande vitesse, les pré-requis sont les suivants.
  - Ordinateur  
Ordinateur prenant en charge USB à grande vitesse (compatible USB 2.0)\*
  - Système d'exploitation  
Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XP Professionnel/Microsoft Windows XP Edition Familiale
  - Pilote USB 2.0  
Pilote pour périphérique USB 2.0 produit par Microsoft Corporation (Le fonctionnement avec d'autres pilotes USB 2.0 n'est pas garantie.)
  - Câble agréé USB 2.0

\* La compatibilité avec tous les périphériques USB 2.0, cartes d'extension USB 2.0 ou cartes d'extension n'est pas garantie.

#### Remarque

Si l'imprimante UP-GR700 est raccordée et sous tension, assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode de veille, attente (suspendu) ou mode hibernation. Sinon, l'opération correcte n'est pas garantie.

---

## A propos de ce document

L'explication des opérations du panneau de configuration dans ce document implique l'utilisation de Windows avec l'affichage classique. Pour basculer vers l'affichage classique, cliquez sur [démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration] et cliquez sur [affichage classique] (pour Windows Vista) ou [Basculer vers l'affichage classique] (pour Windows XP) dans les propriétés du panneau de configuration sur le côté gauche de l'écran.

# Installation du pilote d'imprimante dans Windows Vista

## Avant l'installation


### A propos des actualisations de version


Si vous actualisez un pilote d'imprimante, retirez le pilote d'imprimante précédent avant le début de l'installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote d'imprimante, consultez la section « Désinstallation du pilote d'imprimante dans Windows Vista » dans ce guide.

Si l'installation échoue ou est annulée, redémarrez votre ordinateur avant d'essayer une nouvelle installation.

### Connexion USB 2.0

L'imprimante UP-GR700 est conforme aux spécifications USB 2.0. Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB n'est pas compatible avec USB 2.0, le message suivant apparaît lors du raccordement de l'imprimante UP-GR700. Cliquez sur  pour fermer le message.

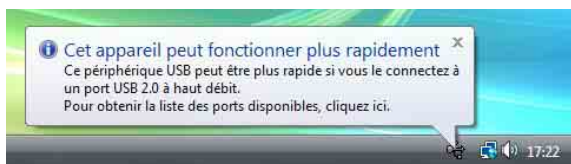

### Raccordement de plusieurs imprimantes

Lors de la connexion de plusieurs imprimantes UP-GR700, vous pouvez simplement raccorder la seconde imprimante ainsi que les supplémentaires et ainsi l'installation s'effectuera automatiquement.

#### Remarque

Pour l'installation d'imprimantes supplémentaires, installez chaque imprimante séparément.


## Pilote d'imprimante de Windows 2000/Windows XP

Etant donné que la première version du pilote d'imprimante de Windows 2000/Windows XP n'est pas prise en charge par Windows Vista, il sera impossible d'imprimer correctement si ce pilote est installé dans Windows Vista. Si vous avez installé la version Windows 2000/Windows XP du pilote d'imprimante dans Windows Vista, suivez les étapes dans la section « Désinstallation du pilote d'imprimante dans Windows Vista » de ce guide pour désinstaller le pilote précédent puis pour installer la version actuelle du pilote d'imprimante prenant en charge Windows Vista.

## Installation dans Windows Vista

- 1 Raccordez l'imprimante UP-GR700 pour laquelle le pilote doit être installé à l'ordinateur.
- 2 Mettez sous tension l'imprimante UP-GR700.
- 3 Mettez l'ordinateur sous tension et ouvrez une session en tant qu'administrateur du système ou membre du groupe administrateurs.

La boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparaît.

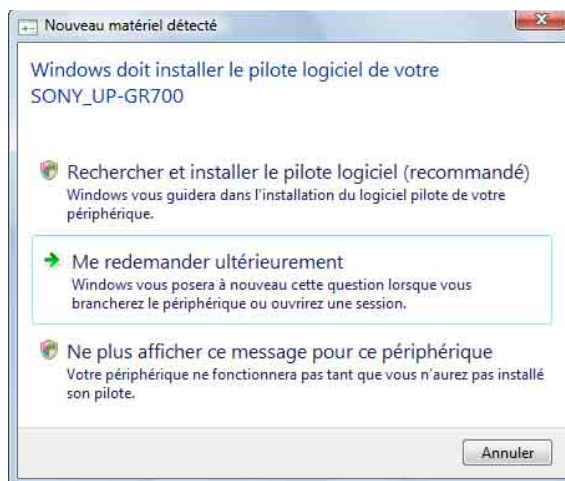


Si la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] n'apparaît pas, effectuez les étapes décrites ci-dessous, avec l'imprimante UP-GR700 pour laquelle le pilote d'imprimante doit être installé sous tension et raccordée à l'ordinateur. (Toute autre imprimante USB ou imprimante UP-GR700 installée précédemment ne doit pas être raccordée en même temps.)

- ① Cliquez [Démarrer] et sélectionnez [Panneau de configuration].
- ② Double-cliquez sur [Système].


- ③ Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].  
La boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît.
- ④ Cliquez sur [Continuer].  
La fenêtre [Gestionnaire de périphériques] apparaît.
- ⑤ Cliquez sur [+] à gauche de [Contrôleurs de bus USB].
- ⑥ Sélectionnez [Prise en charge d'impression USB], puis sélectionnez [Désinstaller] dans le menu [Action].
- ⑦ Redémarrez l'ordinateur.  
La boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparaît.

- 4 Cliquez sur [Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)].


La boîte de dialogue suivante apparaît.

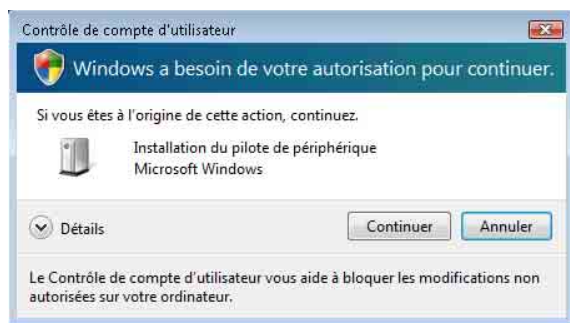

- 5 Cliquez sur [Continuer].
- 6 Cliquez sur [Ne pas rechercher en ligne] si la boîte de dialogue suivante apparaît.

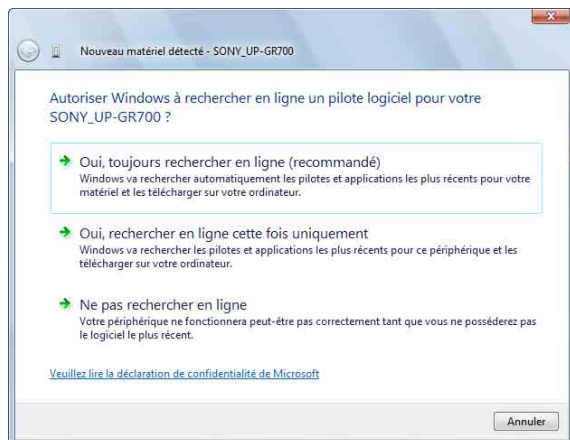

L'écran change comme suit.

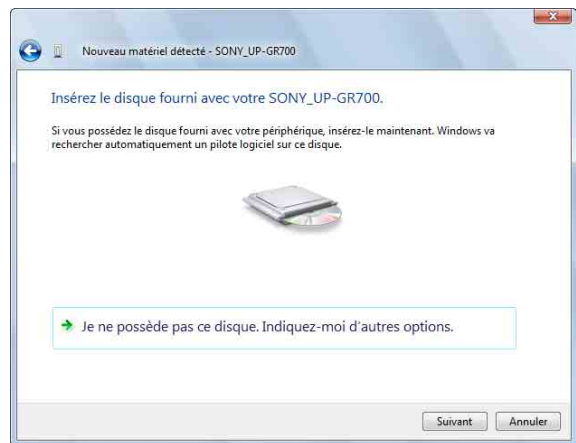


A partir de ce point, la procédure diffère en fonction de l'utilisation ou non du CD-ROM fourni (si vous avez téléchargé le pilote en ligne).


## Procédure avec le CD-ROM fourni

- 7 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.

L'écran change comme suit.

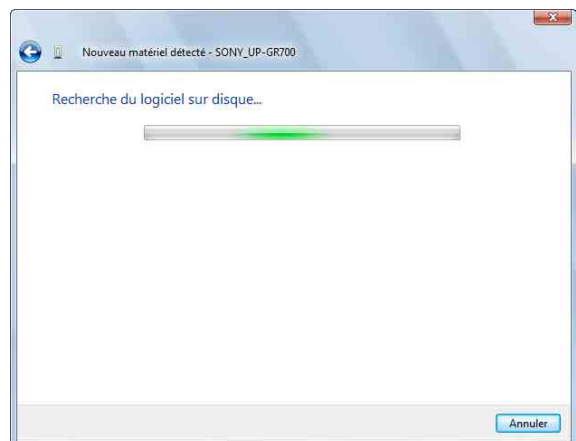


Une fois la recherche de logiciel terminée, la boîte de dialogue suivante apparaît.

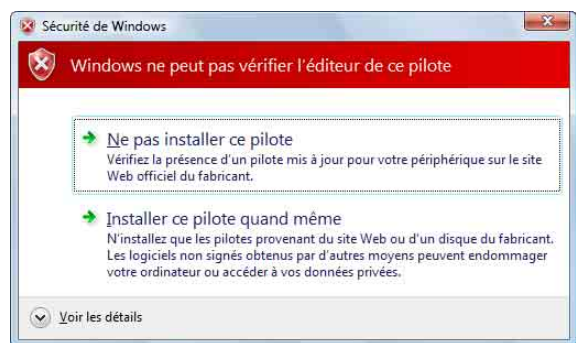


- 8 Cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

La boîte de dialogue se ferme et la [Nouveau matériel détecté] réapparaît.

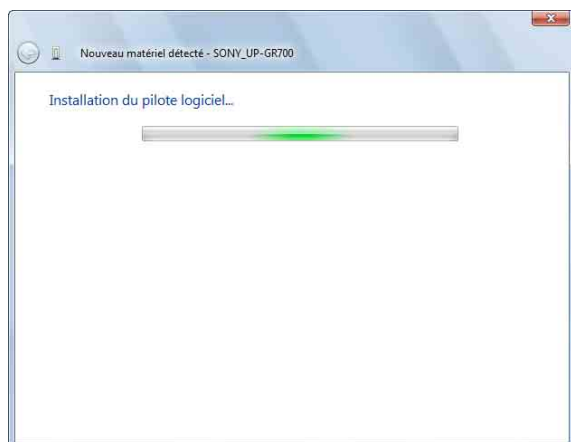

Après avoir copié les fichiers, l'écran change comme suit.

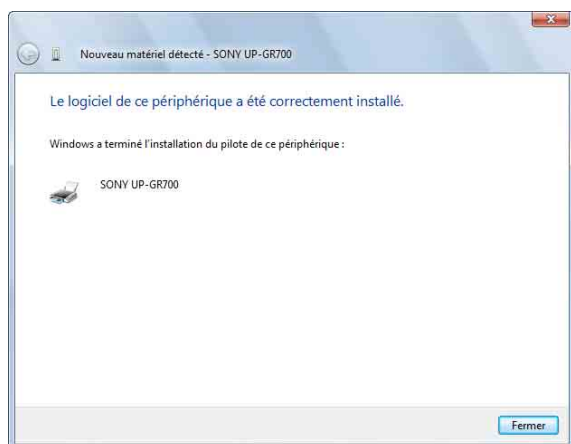


- 9 Cliquez sur [Fermer].

Ceci termine l'installation du pilote d'imprimante.

## Procédure sans le CD-ROM fourni


- 7 Cliquez sur [Je ne possède pas ce disque. Indiquez-moi d'autres options.].

L'écran change comme suit.

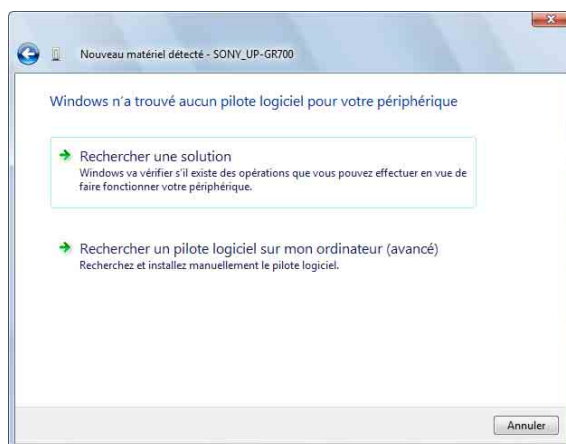

- 8 Cliquez sur [Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur (avancé)].


L'écran change comme suit.

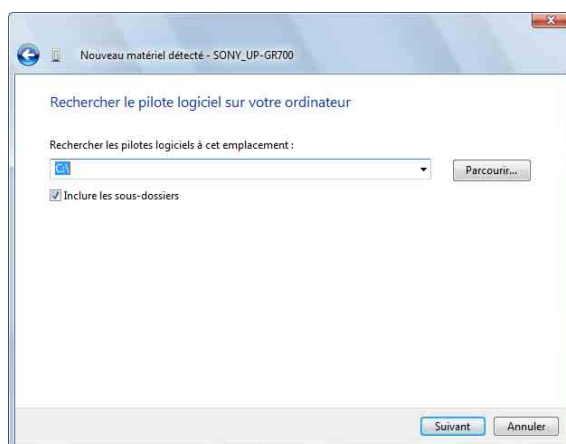

- 9 Cliquez sur [Parcourir...] pour ouvrir la boîte de dialogue [Rechercher un dossier]. Spécifiez le dossier dans lequel le fichier d'installation téléchargé a été extrait, puis cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Rechercher un dossier].


## 10 Cliquez sur [Suivant].

La boîte de dialogue suivante apparaît.

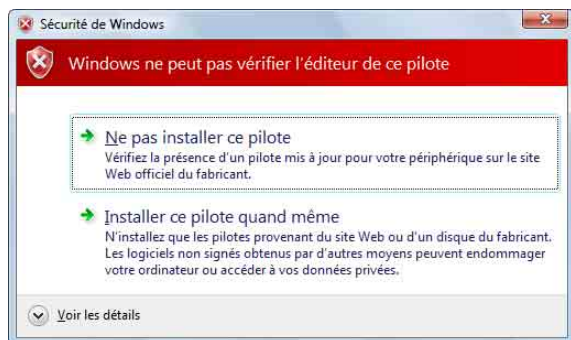


## 11 Cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

La boîte de dialogue se ferme et la [Nouveau matériel détecté] réapparaît.

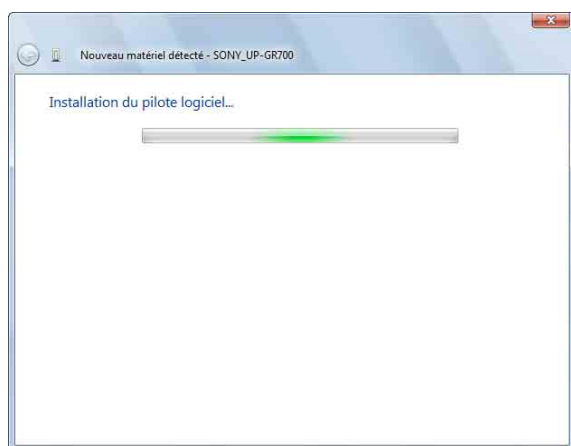

Après avoir copié les fichiers, l'écran change comme suit.

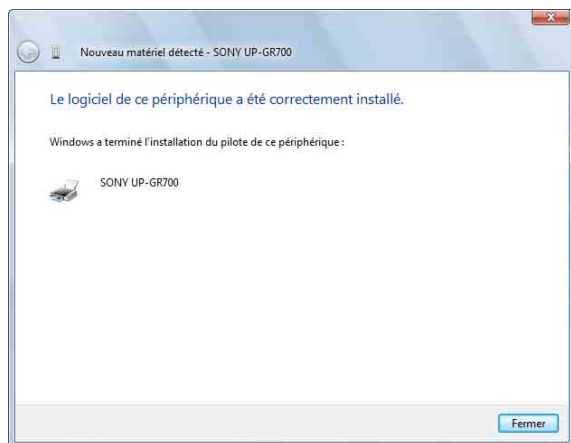

## 12 Cliquez sur [Fermer].

Ceci termine l'installation du pilote d'imprimante.


## Désinstallation du pilote d'imprimante dans Windows Vista

Cette section décrit comment retirer le pilote d'imprimante.

### Remarques

- Pendant la procédure de désinstallation, l'imprimante UP-GR700 ne doit pas être raccordée à l'ordinateur. Si la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparaît, débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante UP-GR700, cliquez sur [Annuler] sur tous les écrans pour fermer la boîte de dialogue puis recommencez la procédure.
- Si plusieurs instances du pilote d'imprimante sont installées dans votre ordinateur lors de la désinstallation, les pilotes d'imprimante (icônes d'imprimante) utilisés pour toutes les imprimantes UP-GR700 utilisées seront désinstallés.

- 1 Cliquez sur [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration] puis sélectionnez [Imprimantes].
- 2 Cliquez droit sur le nom de l'imprimante que vous voulez supprimer pour afficher un menu d'option, puis cliquez sur [Supprimer].

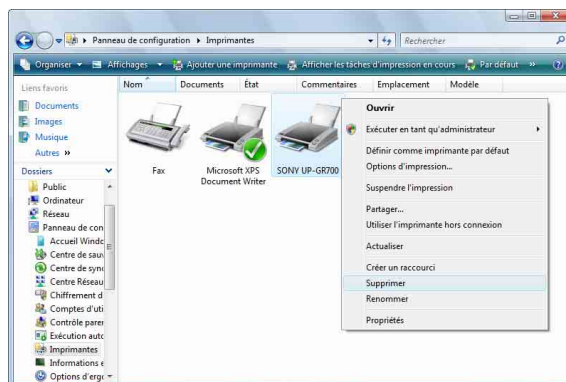


La boîte de dialogue suivante apparaît.




- 3 Cliquez sur [Oui].



- 4 Cliquez droit n'importe où dans la fenêtre (sauf les icônes d'imprimantes) pour afficher un menu d'option, sélectionnez [Exécuter en tant qu'administrateur] puis cliquez sur [Propriétés du serveur].

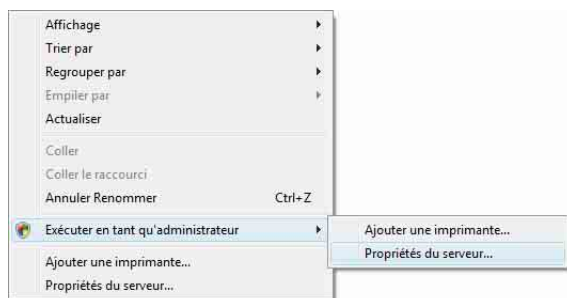


La boîte de dialogue suivante apparaît.

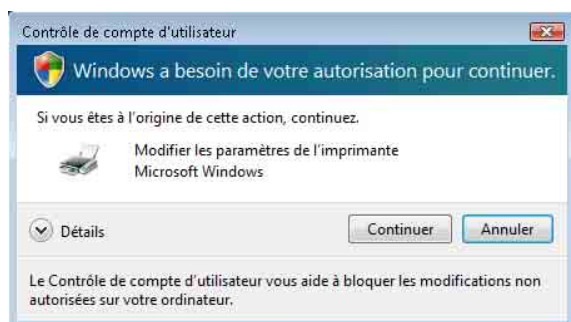

- 5 Cliquez sur [Continuer].

Les propriétés de serveur d'impression apparaissent.

- 6 Cliquez sur l'onglet [Pilotes], sélectionnez le nom de l'imprimante que vous voulez supprimer de la liste [Pilotes d'imprimante installés] puis cliquez [Supprimer].

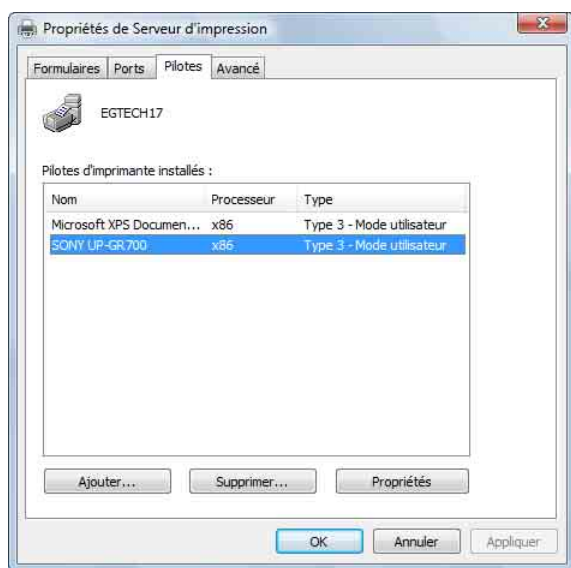


L'écran [Supprimer le pilote et le package] apparaît.




- 7 Sélectionnez [Supprimer le pilote et le package de pilotes] puis cliquez sur [OK].

La boîte de dialogue suivante apparaît.

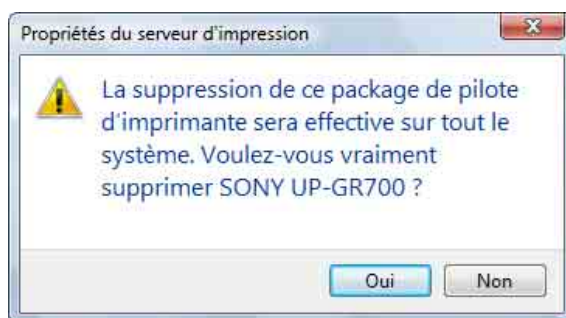

- 8 Cliquez sur [Oui].

La boîte de dialogue suivante apparaît.

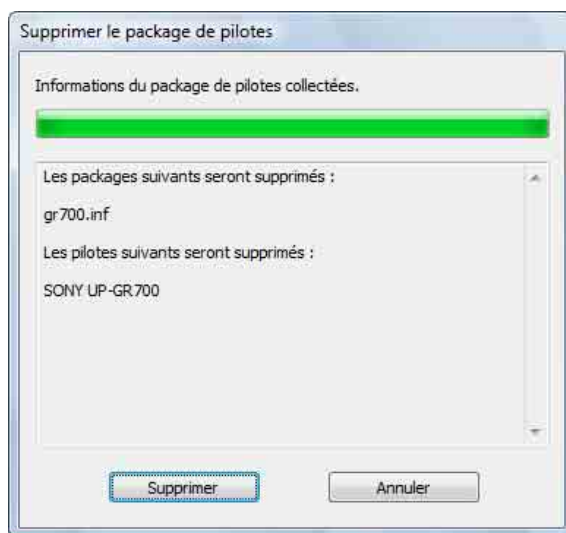



## 9 Cliquez sur [Supprimer].

L'écran change comme suit.



## 10 Cliquez [OK] pour fermer l'écran.

### Remarque

L'avertissement [Le pilote d'imprimante spécifié est en cours d'utilisation.] peut apparaître. Si ce message apparaît, redémarrez votre ordinateur et effectuez de nouveau la procédure de désinstallation.

## Configuration de l'imprimante dans Windows Vista

Avant d'imprimer à partir d'une application, vous devez effectuer les réglages nécessaires des propriétés de l'imprimante.


Pour faire apparaître la fenêtre des propriétés de l'imprimante, utilisez une des méthodes suivantes.

- Cliquez sur [démarrer] puis sur [Panneau de configuration]. Sélectionnez [Imprimantes]. Sélectionnez l'icône d'imprimante UP-GR700 puis cliquez sur [Sélectionnez les préférences d'impression] dans la barre d'outils. Les paramètres définis de cette manière sont utilisés comme paramètres par défaut lors de l'impression à partir d'applications.
- Dans le menu [Fichier] de votre application, cliquez sur l'élément pour définir les paramètres d'imprimante. Les paramètres définis de cette manière seront valides jusqu'au moment où vous fermez l'application.

Cette section décrit les paramètres disponibles sous les onglets dans [UP-GR700 Préférences de l'impression].

## Onglet [Disposition]

Cet onglet s'utilise pour les paramètres d'impression de base.

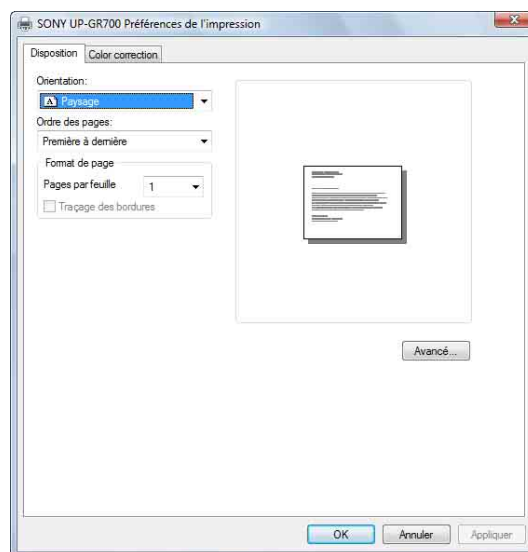

### Orientation

Sélectionnez [Portrait] ou [Paysage].

### Ordre des pages

Sélectionnez [Première à dernière] ou [Dernière à première] pour l'ordre d'impression.

### Pages par feuille

Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.

### Traçage des bordures


Activé lorsque [Pages par feuille] est réglé sur 2 ou plus. Cliquez si les bordures ont besoin d'être élargies.

### Avancé

Cliquez pour afficher la fenêtre [Options avancées].

## Onglet [Color correction]

Cet onglet s'utilise pour définir les paramètres de couleur, luminosité et autres paramètres apparentés à l'image.

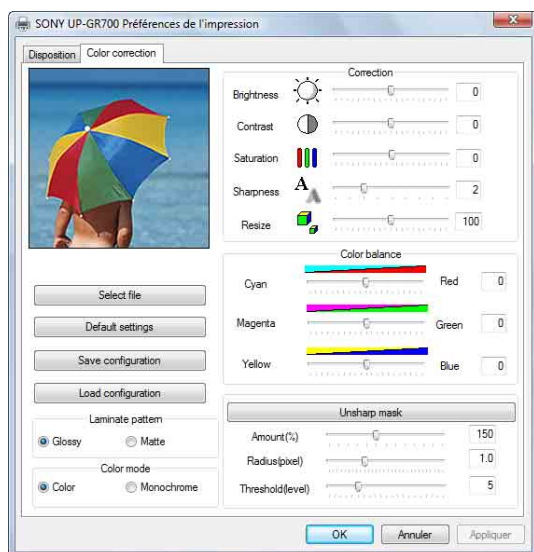

### Select file

Cliquez pour sélectionner l'image qui apparaît dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

### Remarques

- Pour le format de l'image, les formats BMP couleurs 24 bits uniquement peuvent être sélectionnés. La taille de l'image n'est pas limitée.
- La fenêtre affiche une zone de 256 × 256 points à partir du centre de l'image sélectionnée.

### Default settings

Cliquez sur l'onglet [Color correction] pour restaurer tous les paramètres modifiés à leurs valeurs par défaut.

### Save configuration

Cliquez pour enregistrer la configuration de l'onglet [Color correction] dans un fichier.

### Load configuration

Cliquez pour restaurer une configuration enregistrée pour l'onglet [Color correction].

### Laminate pattern

Sélectionnez [Glossy] ou [Matte] pour la finition de la stratification.

### Color mode

Sélectionnez [Color] ou [Monochrome] pour le mode de couleur.

## Correction

Effectuez les réglages de l'image.

Réglez les éléments (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, et Resize) en déplaçant les glisseurs respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir les valeurs dans les champs d'entrée.

## Color balance

Réglez les éléments en déplaçant les glisseurs respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir les valeurs dans les champs d'entrée.


## Unsharp mask

Cliquez pour activer/désactiver le masque flou.

Lorsque unsharp mask est activé, réglez les éléments (Amount, Radius, et Threshold) en déplaçant les glisseurs respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir les valeurs dans les champs d'entrée.

## Fenêtre [Options avancées]

Cette fenêtre s'utilise pour définir les paramètres du document tels que le format de papier, le nombre de copies et le nombre de pages par feuille.

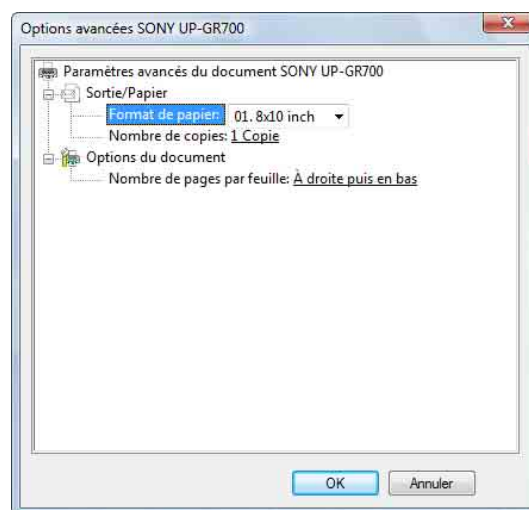

### Format de papier

Sélectionnez [01. 8×10 inch], [02. 8×12 inch], [03. 8×8 inch], [04. 8×5 inch×2], [05. 8×6 inch×2] ou [06. 8×4 inch×3] comme format de papier pour l'impression.

### Remarque

Si [05. 8×6 inch×2] ou [06. 8×4 inch×3] est sélectionné, la taille imprimée sera d'environ 8×5,9 pouces×2 et 8×3,87 pouces×3 respectivement.

### Nombre de copies

Cliquez pour définir le nombre de copies à imprimer, entre 1 et 20.

### Assemblées

Définissez si les pages du document seront assemblées ou imprimées séparément pendant l'impression de plusieurs copies.

Cet élément est activé uniquement lorsque [Nombre de copies] est réglé entre 2 et 20.

### Nombre de pages par feuille

Sélectionnez [À droite puis en bas], [En bas puis à droite], [À gauche puis en bas] ou [En bas puis à gauche] comme disposition des pages à imprimer.

# Installation du pilote d'imprimante dans Windows XP

## Avant l'installation

### A propos des actualisations de version

Si vous actualisez un pilote d'imprimante, retirez le pilote d'imprimante précédent avant le début de l'installation.


Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote d'imprimante, consultez la section « Désinstallation du pilote d'imprimante dans Windows XP » dans ce guide.


Si l'installation échoue ou est annulée, redémarrez votre ordinateur avant d'essayer une nouvelle installation.

### Remarque

Veillez à redémarrer votre ordinateur après l'installation ou la désinstallation du pilote d'imprimante. L'opération peut être instable si vous ne redémarrez pas.

## Connexion USB 2.0

L'imprimante UP-GR700 est compatible avec USB 2.0. Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB n'est pas compatible avec USB 2.0, le message suivant apparaît lors du raccordement de l'imprimante UP-GR700. Cliquez sur  pour fermer le message.

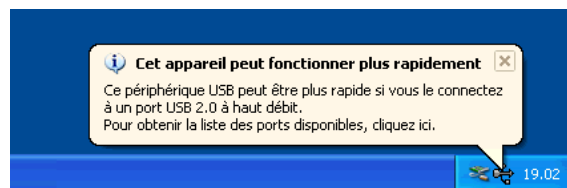

## A propos des options de signature du pilote

La présent pilote d'imprimante n'a pas reçu le logo Windows dès lors un message d'erreur vous empêchant d'installer le pilote peut apparaître lors de l'installation du pilote.

Dans la boîte de dialogue [Options de signature du pilote], sélectionnez [Ignorer] ou [Avertir] dans la zone de groupe [Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?]. Si vous sélectionnez [Bloquer], vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante.



Ouvrez la boîte de dialogue [Options de signature du pilote] comme suit :

- ① Dans le menu [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration].
- ② Double-cliquez sur [Système].  
La boîte de dialogue [Propriétés système] s'affiche.
- ③ Cliquez sur l'onglet [Matériel].
- ④ Cliquez sur le bouton [Signature du pilote].

Toutes les explications dans ce guide impliquent que le paramètre dans cette boîte de dialogue est [Avertir].

## Raccordement de plusieurs imprimantes

Quand plusieurs imprimantes UP-GR700 sont raccordées à un ordinateur fonctionnant sous Windows XP, installez le pilote d'imprimante en fonction des explications dans la section « Installation dans Windows XP ».


### Remarque

Pour l'installation d'imprimantes supplémentaires, installez chaque imprimante séparément.

## Installation dans Windows XP

- 1 Raccordez l'imprimante UP-GR700 (une seule) pour laquelle le pilote doit être installé à l'ordinateur.
- 2 Mettez sous tension l'imprimante UP-GR700 raccordée.
- 3 Mettez l'ordinateur sous tension et ouvrez une session en tant qu'administrateur du système ou membre du groupe administrateur.

[Assistant Matériel détecté] apparaît.

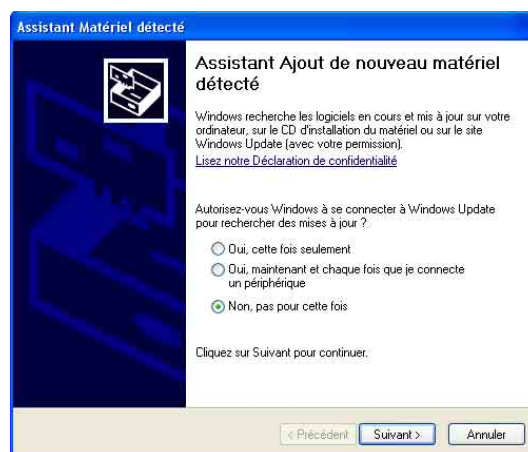


- Si l'écran [Assistant Matériel détecté] ressemble à celui indiqué à l'étape 3, passez à l'étape 4.
  - Si l'écran [Assistant Matériel détecté] est différent de celui indiqué à l'étape 3, passez à l'étape 5.
  - Si l'écran [Assistant Matériel détecté] n'apparaît pas, effectuez les étapes décrites ci-dessous, avec l'imprimante UP-GR700 pour laquelle le pilote d'imprimante doit être installé sous tension et raccordée à l'ordinateur. (Toute autre imprimante USB ou imprimante UP-GR700 installée précédemment ne doit pas être raccordée en même temps.)
- ① Cliquez [démarrer] et sélectionnez [Panneau de configuration].
  - ② Double-cliquez sur [Système].  
La boîte de dialogue [Propriétés système] s'affiche.
  - ③ Cliquez sur l'onglet [Matériel].
  - ④ Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].  
La fenêtre [Gestionnaire de périphériques] apparaît.
  - ⑤ Cliquez sur [+] à gauche de [Contrôleurs de bus USB].

⑥ Cliquez-droit sur [Prise en charge d'impression USB], et ouvrez les propriétés. Confirmez la sélection de [UP-GR700] dans [Emplacement], puis sélectionnez [Désinstaller] du menu [Action].


⑦ Redémarrez l'ordinateur. [Assistant Matériel détecté] apparaît.

4 Cliquez sur [Non, pas pour cette fois] et cliquez sur [Suivant].

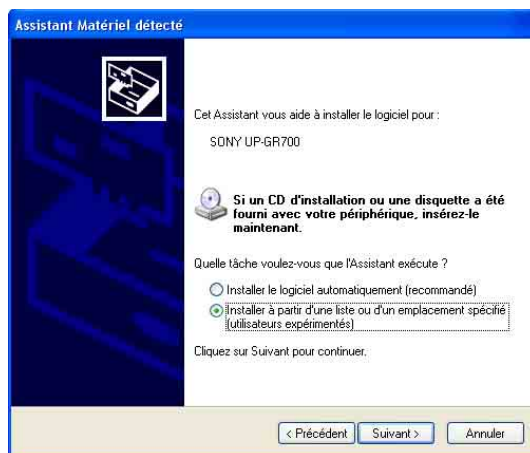

5 Sélectionnez [Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)], puis cliquez sur [Suivant].

L'écran change comme suit.

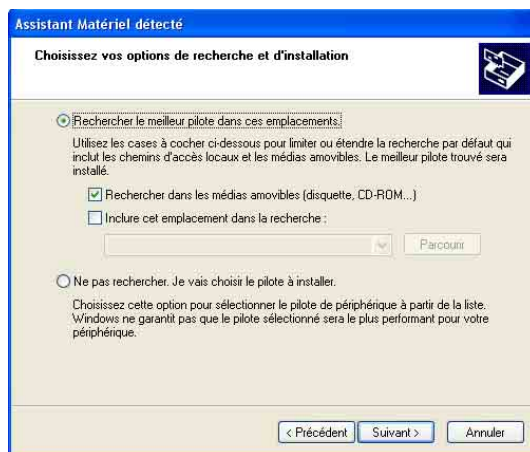

6 Sélectionnez [Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements], sélectionnez [Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)], puis introduisez le CD-ROM fourni « PRINTER DRIVER & INSTRUCTIONS FOR USE UP-GR700 » dans le lecteur CD-ROM.


7 Cliquez sur [Suivant].

La boîte de dialogue suivante apparaît.



8 Cliquez sur [Continuer].

Après avoir copié les fichiers, l'écran suivant apparaît.

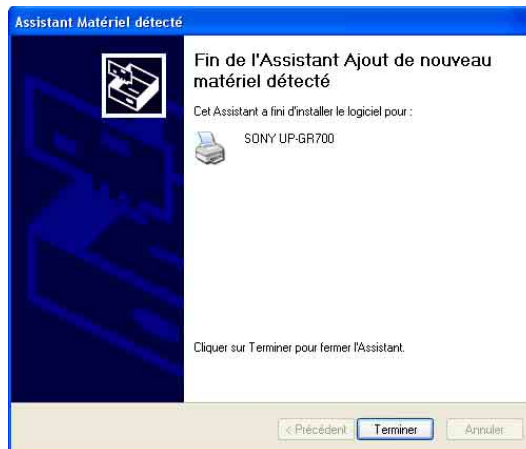

9 Cliquez sur [Terminer].

10 Redémarrez l'ordinateur.

Ceci termine l'installation du pilote d'imprimante.




## Désinstallation du pilote d'imprimante dans Windows XP

Cette section décrit comment retirer le pilote d'imprimante.

### Remarques


- Pendant la procédure de désinstallation, l'imprimante UP-GR700 ne doit pas être raccordée à l'ordinateur. Si la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparaît, débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante UP-GR700, cliquez sur [Annuler] sur tous les écrans pour fermer la boîte de dialogue puis recommencez la procédure de désinstallation.
- Si la procédure de désinstallation est effectuée avec plusieurs exemples du pilote d'imprimante installé, tous les pilotes pour imprimantes UP-GR700 (icônes d'imprimante) seront désinstallés.
- Si l'avertissement « The specified printer driver is currently in use. » apparaît, redémarrez l'ordinateur et suivez à nouveau la procédure de désinstallation.

- 1 Mettez hors tension l'imprimante UP-GR700 et débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante.
- 2 Mettez l'ordinateur sous tension et ouvrez une session en tant qu'administrateur du système ou membre du groupe administrateur.
- 3 Cliquez [démarrer] et sélectionnez [Panneau de configuration]. Puis sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].

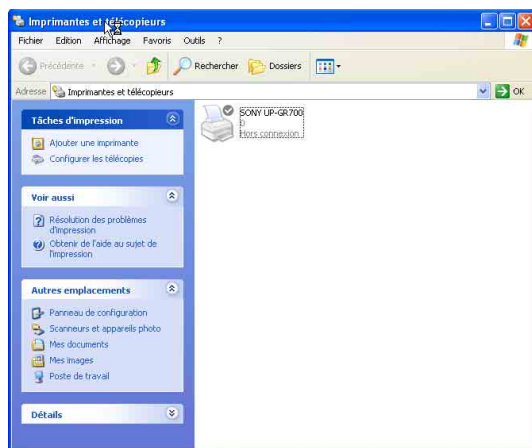

- 4 Sélectionnez le nom de l'imprimante à supprimer, puis sélectionnez [Supprimer] à partir du menu [Fichier].

La boîte de dialogue suivante apparaît.

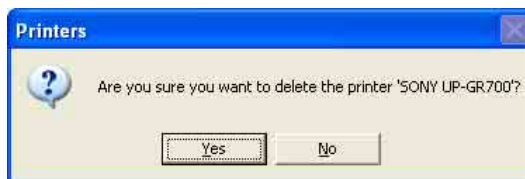


- 5 Cliquez sur [Yes].
- 6 Sélectionnez [Propriétés du serveur] à partir du menu [Fichier].

La fenêtre [Propriétés de Serveur d'impression] apparaît.



- 7 Cliquez sur l'onglet [Pilotes], sélectionnez le nom de l'imprimante à supprimer à partir de la liste [Pilotes d'imprimante installés], puis cliquez sur [Supprimer].

La boîte de dialogue suivante apparaît.

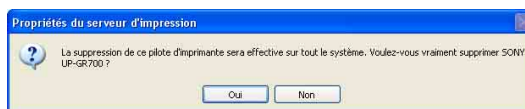

- 8 Cliquez sur [Oui].
- 9 Cliquez sur [OK] dans la fenêtre [Propriétés de Serveur d'impression].

Ceci termine la procédure de désinstallation du pilote d'imprimante.

## Configuration de l'imprimante dans Windows XP

Avant d'imprimer à partir d'une application, vous devez effectuer les réglages nécessaires des propriétés de l'imprimante.


Pour faire apparaître la fenêtre des propriétés de l'imprimante, utilisez une des méthodes suivantes.

- Cliquez sur [démarrer] puis sur [Panneau de configuration]. Sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs]. Sélectionnez l'icône d'imprimante UP-GR700 puis cliquez sur [Options d'impression] dans le menu [Fichier]. Les paramètres définis de cette manière sont utilisés comme paramètres par défaut lors de l'impression à partir d'applications.
- Dans le menu [Fichier] de votre application, cliquez sur l'élément pour définir les paramètres d'imprimante. Les paramètres définis de cette manière seront valides jusqu'au moment où vous fermez l'application.

Cette section décrit les paramètres disponibles sous les onglets dans [UP-GR700 Options d'impression].

### Onglet [Disposition]

Cet onglet s'utilise pour les paramètres d'impression de base.

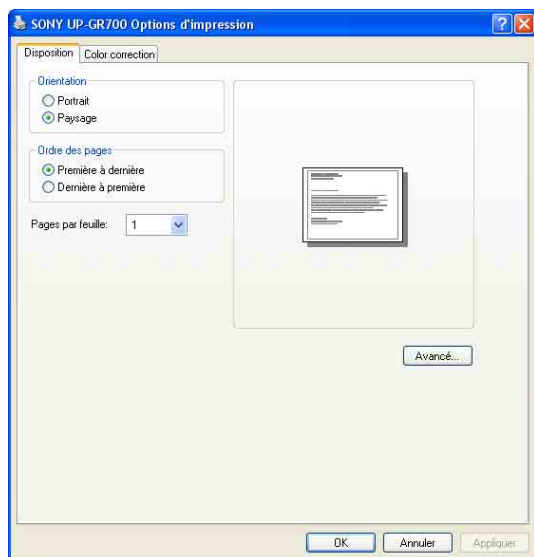

#### Orientation

Sélectionnez [Portrait] ou [Paysage].

#### Ordre des pages

Sélectionnez [Première à dernière] ou [Dernière à première] pour l'ordre d'impression.

### Pages par feuille


Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.

### Avancé

Cliquez pour afficher la fenêtre [Options avancées].

### Onglet [Color correction]

Cet onglet s'utilise pour définir les paramètres de couleur, luminosité et autres paramètres apparentés à l'image.

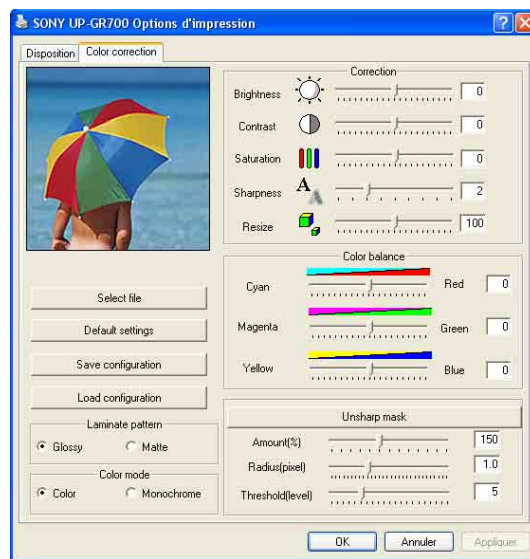

#### Select file

Cliquez pour sélectionner l'image qui apparaît dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

#### Remarques

- Pour le format de l'image, les formats BMP couleurs 24 bits uniquement peuvent être sélectionnés. La taille de l'image n'est pas limitée.
- La fenêtre affiche une zone de 256 × 256 points à partir du centre de l'image sélectionnée.

#### Default settings

Cliquez sur l'onglet [Color correction] pour restaurer tous les paramètres modifiés à leurs valeurs par défaut.

#### Save configuration

Cliquez pour enregistrer la configuration de l'onglet [Color correction] dans un fichier.

#### Load configuration

Cliquez pour restaurer une configuration enregistrée pour l'onglet [Color correction].

#### Laminate pattern

Sélectionnez [Glossy] ou [Matte] pour la finition de la stratification.



### Color mode

Sélectionnez [Color] ou [Monochrome] pour le mode de couleur.

### Correction

Effectuez les réglages de l'image.

Réglez les éléments (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, et Resize) en déplaçant les glisseurs respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir les valeurs dans les champs d'entrée.

### Color balance

Réglez les éléments en déplaçant les glisseurs respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir les valeurs dans les champs d'entrée.

### Unsharp mask

Cliquez pour activer/désactiver le masque flou.

Lorsque unsharp mask est activé, réglez les éléments (Amount, Radius, et Threshold) en déplaçant les glisseurs respectifs de gauche ou droite. Vous pouvez aussi saisir les valeurs dans les champs d'entrée.

## Fenêtre [Options avancées]

Cette fenêtre s'utilise pour définir les paramètres du document tels que le format de papier et le nombre de copies.



### Taille du papier

Sélectionnez [01. 8×10 inch], [02. 8×12 inch], [03. 8×8 inch], [04. 8×5 inch×2], [05. 8×6 inch×2] ou [06. 8×4 inch×3] comme format de papier pour l'impression.

### Remarque

Si [05. 8×6 inch×2] ou [06. 8×4 inch×3] est sélectionné, la taille imprimée sera d'environ 8×5,9 pouces×2 et 8×3,87 pouces×3 respectivement.

### Nombre de copies

Cliquez pour définir le nombre de copies à imprimer, entre 1 et 20.

### Assemblées

Définissez si les pages du document seront assemblées ou imprimées séparément pendant l'impression de plusieurs copies.

Cet élément est activé uniquement lorsque [Nombre de copies] est réglé entre 2 et 20.


# A propos de la zone d'impression

A l'impression, la UP-GR700 diminue la zone entourant les données d'image d'environ 1,9 mm (22 points). Préparez l'image à imprimer en tenant compte de la zone à supprimer.

Si vous avez deux ou trois images à imprimer, vous devez les aligner et les traiter comme un ensemble.

## Impression d'une image

Imprime une image. Si vous utilisez cette méthode, définissez la taille de l'image (C x D) en vous référant au tableau ci-dessous. La taille réelle de l'image imprimée correspondra à A x B.

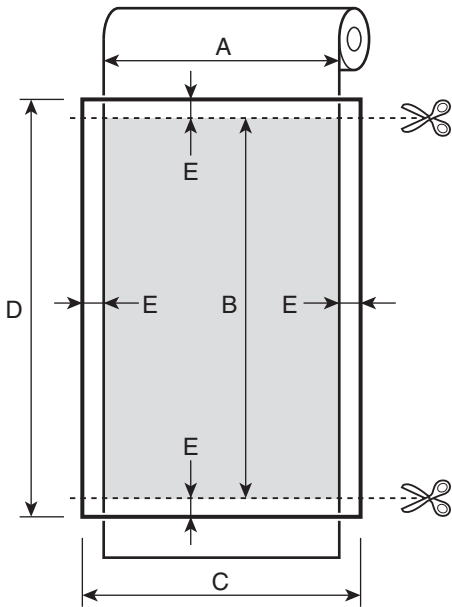

A/B/C/D : Voir tableau ci-dessous.  
E : 22 points


Paramètre de format de papier	Taille de l'image (A x B)	Format de l'image (C x D)
[01. 8x10 inch]	203 x 254 mm (8 x 10 pouces) (2400 x 3000 points)	2444 x 3044 points
[02. 8x12 inch]	203 x 305 mm (8 x 12 pouces) (2400 x 3600 points)	2444 x 3644 points
[03. 8x8 inch]	203 x 203 mm (8 x 8 pouces) (2400 x 2400 points)	2444 x 2444 points

# Impression de deux images

Imprime deux images à la fois. Vous devez aligner les deux images et les traiter comme un ensemble. Réglez l'image sur le format (C x D) indiqué sur la figure/le tableau ci-dessous. La taille réelle de l'image imprimée correspondra à A x B.

## Remarque

L'insertion d'espaces (16 points) est nécessaire entre chaque image (représentée par F sur la figure). Rien ne sera imprimé dans ces zones, même si elles contiennent des données.

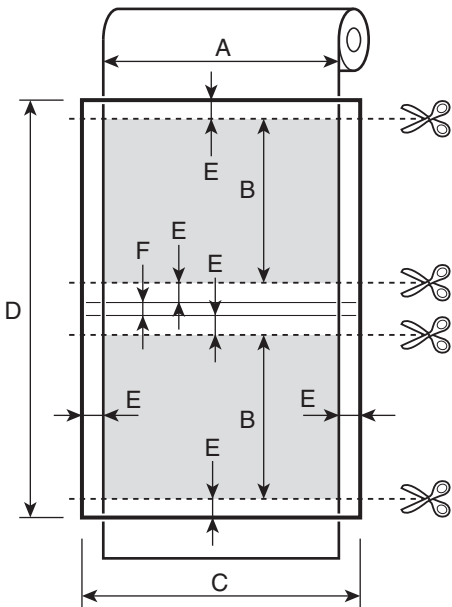

A/B/C/D : Voir le tableau.  
E : 22 points  
F : 16 points


Paramètre de format de papier	Taille de l'image (A x B)	Format de l'image (C x D)
[04. 8x5 inchx2]	203 x 127 mm (8 x 5 pouces) (2400 x 1500 points)	2444 x 3104 points
[05. 8x6 inchx2]	203 x 150 mm (8 x 5,9 pouces) (2400 x 1770 points)	2444 x 3644 points

# Impression de trois images

Imprime trois images à la fois. Vous devez aligner les trois images et les traiter comme un ensemble. Réglez l'image sur le format (C × D) indiqué sur la figure/le tableau ci-dessous. La taille réelle de l'image imprimée correspondra à A × B.

## Remarque

L'insertion d'espaces (16 points) est nécessaire entre chaque image (représentée par F sur la figure). Rien ne sera imprimé dans ces zones, même si elles contiennent des données.

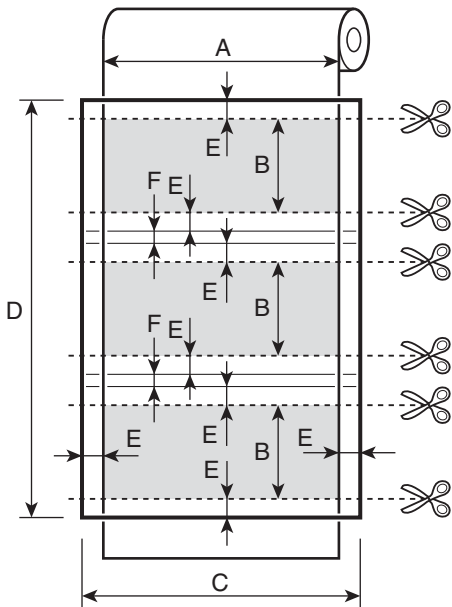

A/B/C/D : Voir le tableau.

E : 22 points

F : 16 points

Paramètre de format de papier	Taille de l'image (A × B)	Format de l'image (C × D)
[06. 8×4 inch×3]	203 × 98 mm (8 × 3,87 pouces) (2400 × 1160 points)	2444 × 3644 points