



Printer Driver

Guía de instalación

Esta guía describe la instalación del controlador de la impresora en Windows Vista y Windows XP.

Antes de utilizar el software

Antes de utilizar el controlador de la impresora, asegúrese de leer el archivo "ReadMe".

UP-GR700

Tabla de contenido

Requisitos del entorno operativo	3
Acerca de este documento	3
Instalación del controlador de la impresora en	
Windows Vista	4
Antes de la instalación	4
Instalación en Windows Vista	4
Desinstalación del controlador de la impresora	
en Windows Vista	7
Configuración de la impresora en	
Windows Vista	9
Instalación del controlador de la impresora en	
Windows XP	11
Antes de la instalación	11
Instalación en Windows XP	12
Desinstalación del controlador de la impresora	
en Windows XP	14
Configuración de la impresora en	
Windows XP	15
Acerca del área de impresión	17
Impresión de una imagen	17
Impresión de dos imágenes	17
Impresión de dos imágenes	18

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. El resto de nombres de compañías y de productos mencionados en esta guía son también marcas comerciales y marcas comerciales registradas.

Requisitos del entorno operativo

Los requisitos del sistema para la utilización del controlador de la impresora son los siguientes.

- Equipo con Microsoft Windows Vista (la edición de 64 bits no es compatible)
- o
- Equipo con Microsoft Windows XP Professional/Home Edition

Acerca de USB 2.0

- La UP-GR700 es compatible con las especificaciones USB 2.0.
- USB 2.0 es completamente compatible con USB 1.1.
- USB 2.0 admite el funcionamiento convencional a velocidad moderada (baja) y a alta velocidad.
- En entornos USB 1.1, puede realizarse la conexión y el funcionamiento a velocidad moderada. Para el funcionamiento a alta velocidad, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos.
 - Ordenador
Ordenador compatible con USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0)*
 - Sistema operativo
Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XP Professional/Microsoft Windows XP Home Edition
 - Controlador USB 2.0
Controlador del dispositivo USB 2.0 fabricado por Microsoft Corporation (no se garantiza el funcionamiento con otros controladores USB 2.0.)
 - Cable USB 2.0 certificado

* No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos USB 2.0, tarjetas de expansión USB 2.0 ni tarjetas de expansión.

Nota

Cuando la UP-GR700 esté conectada y encendida, asegúrese de que el ordenador no entre en modo de reposo, de espera (suspensión) o hibernación, ya que, de lo contrario, no se garantiza el funcionamiento.

Acerca de este documento

En la explicación del funcionamiento del panel de control de este documento, se presupone que Windows se utiliza con la vista clásica. Para cambiar a la vista clásica, haga clic en [Inicio], seleccione [Panel de control] y haga clic en [Vista clásica] (para Windows Vista) o [Cambiar a Vista clásica] (para Windows XP) situado en Propiedades del panel de control que aparece en la parte izquierda de la pantalla.

Instalación del controlador de la impresora en Windows Vista

Antes de la instalación


Acerca de las actualizaciones de la versión


En caso de que esté actualizando un controlador de impresora, elimine el anterior antes de iniciar la instalación.

Para obtener más información acerca del procedimiento de eliminación del controlador de impresora, consulte la sección “Desinstalación del controlador de la impresora en Windows Vista” de esta guía.

Si la instalación no se realiza correctamente o se cancela, reinicie el ordenador antes de volver a intentarlo.

Conexión USB 2.0

La UP-GR700 es compatible con las especificaciones USB 2.0. Sin embargo, si el ordenador o el concentrador USB no son compatibles con USB 2.0, se mostrará el siguiente mensaje al conectar la UP-GR700. Haga clic en  para cerrar el mensaje.

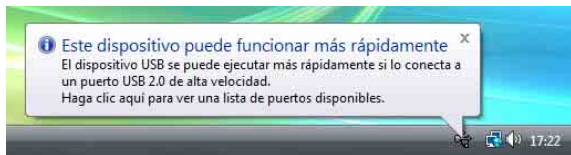

Conexión de varias impresoras

La conectar las impresoras UP-GR700, es posible conectar simplemente la segunda y las posteriores impresoras para llevar a cabo la instalación automáticamente.

Nota

Para instalar el resto de impresoras, instale cada una por separado.


Controlador de impresora para Windows 2000/Windows XP

Debido a que la versión anterior del controlador de impresora para Windows 2000/Windows XP no es compatible con Windows Vista, no será posible imprimir correctamente si se instala en Windows Vista. Si ha instalado la versión para Windows 2000/Windows XP del controlador de impresora en Windows Vista, siga los pasos que se indican en la sección “Desinstalación del controlador de la impresora en Windows Vista” de esta guía para desinstalar el controlador anterior y, a continuación, instale la versión del controlador de impresora compatible con Windows Vista.

Instalación en Windows Vista

- 1 Conecte la UP-GR700 cuyo controlador desea instalar en el ordenador.
- 2 Encienda la UP-GR700 conectada.
- 3 Encienda el ordenador e inicie sesión como administrador del sistema o como miembro del grupo de administradores.

Aparecerá el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado].

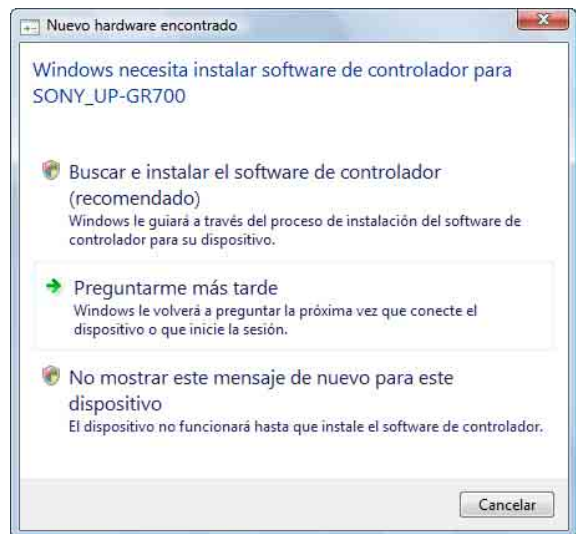


Si el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado] no aparece, lleve a cabo los pasos que se describen a continuación con la UP-GR700 cuyo controlador desea instalar encendida y conectada al equipo. (No debe haber otras impresoras UP-GR700 conectadas en este momento.)

- ① Haga clic en [Iniciar] y seleccione [Panel de control].
- ② Haga doble clic en [Sistema].
- ③ Haga clic en [Administrador de dispositivos]. Aparecerá el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario].


- ④ Haga clic en [Continuar].
Aparecerá la ventana [Administrador de dispositivos].
- ⑤ Haga clic en [+] situado a la izquierda de [Controladoras de bus serie universal].
- ⑥ Seleccione [Compatibilidad con impresoras USB] y, a continuación, seleccione [Desinstalar] en el menú [Acción].
- ⑦ Reinicie el ordenador.
Aparecerá el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado].

- 4 Haga clic en [Buscar e instalar el software de controlador (recomendado)].


Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

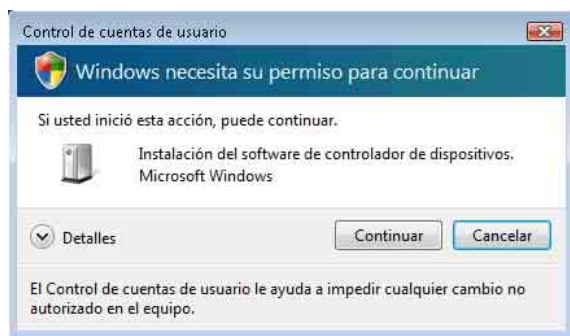

- 5 Haga clic en [Continuar].
- 6 Haga clic en [No buscar en línea] si aparece el siguiente cuadro de diálogo.

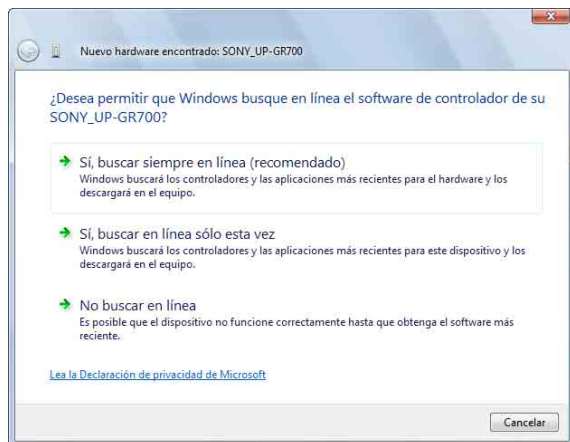

La pantalla cambiará del modo siguiente.

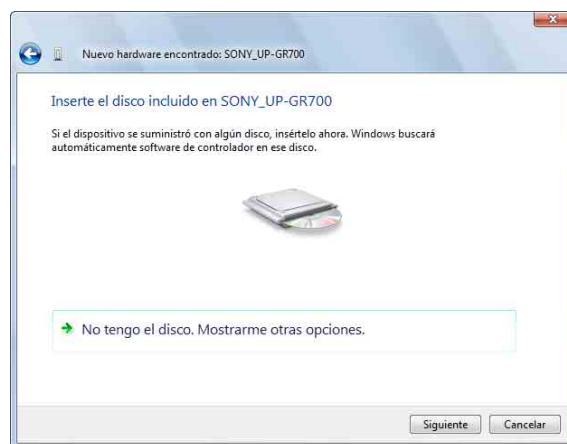


A partir de aquí, el procedimiento variará en función de si se utiliza el CD-ROM suministrado o no (si ha descargado el controlador en línea).

Procedimiento con el CD-ROM suministrado

- 7 Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM.

La pantalla cambiará del modo siguiente.

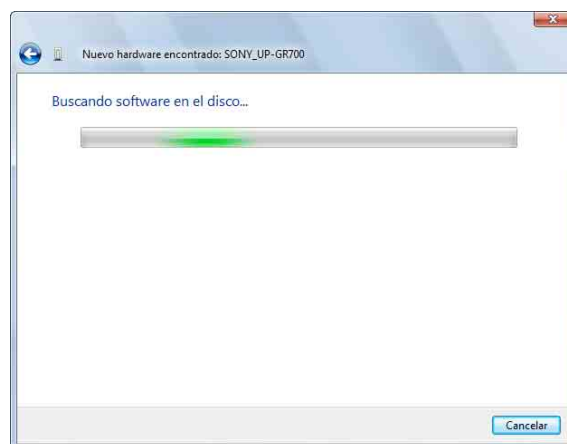


Una vez finalizada la búsqueda del software, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.




- 8** Haga clic en [Instalar este software de controlador de todas formas].

El cuadro de diálogo se cierra y vuelve a aparecer el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado].

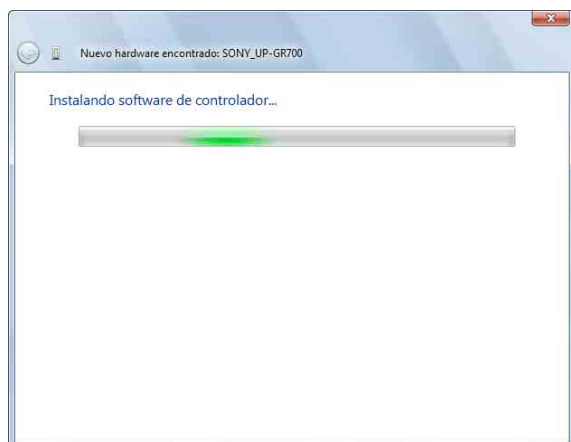

Una vez copiados los archivos, la pantalla cambiará del modo siguiente.

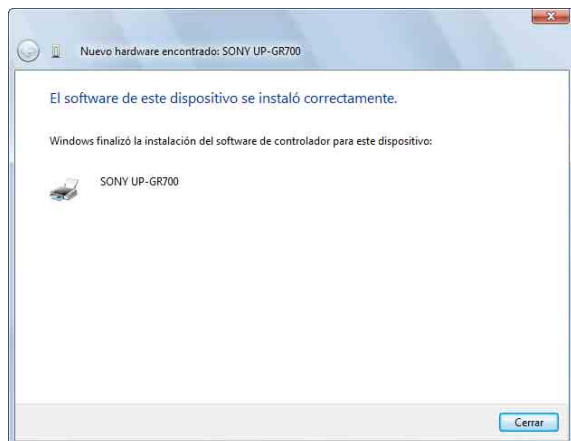


- 9** Haga clic en [Cerrar].

De este modo finaliza la instalación del controlador de la impresora.

Procedimiento sin el CD-ROM suministrado


- 7** Haga clic en [No tengo el disco. Mostrarme otras opciones.].

La pantalla cambiará del modo siguiente.

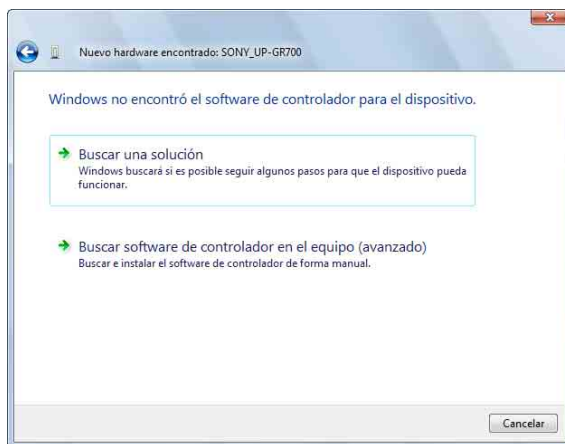

- 8** Haga clic en [Buscar software de controlador en el equipo (avanzado)].

La pantalla cambiará del modo siguiente.

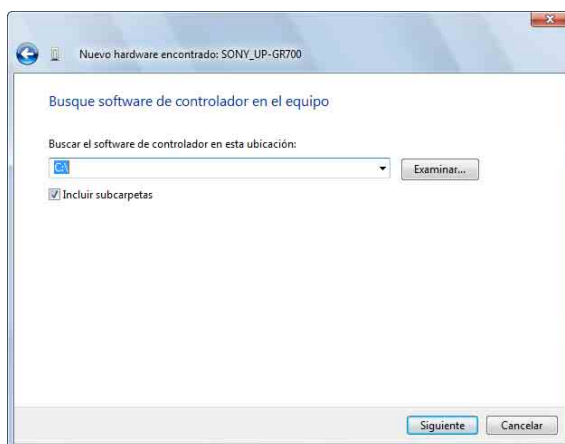

- 9** Haga clic en [Examinar] para abrir el cuadro de diálogo [Buscar carpeta]. Especifique la carpeta en la que se extrajo el archivo de instalación descargado y, a continuación, haga clic en [Aceptar] para cerrar el cuadro de diálogo [Buscar carpeta].


10 Haga clic en [Siguiente].

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.




11 Haga clic en [Instalar este software de controlador de todas formas].

El cuadro de diálogo se cierra y vuelve a aparecer el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado].

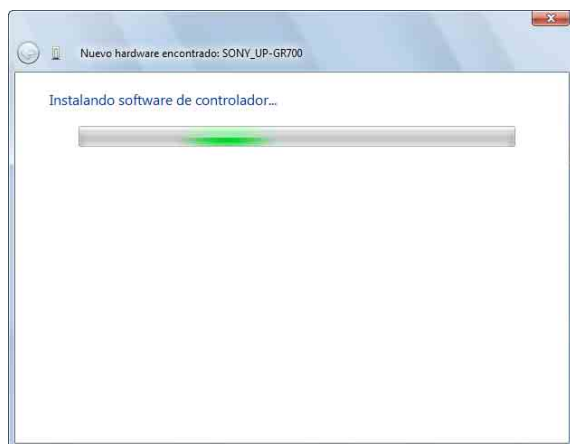

Una vez copiados los archivos, la pantalla cambiará del modo siguiente.

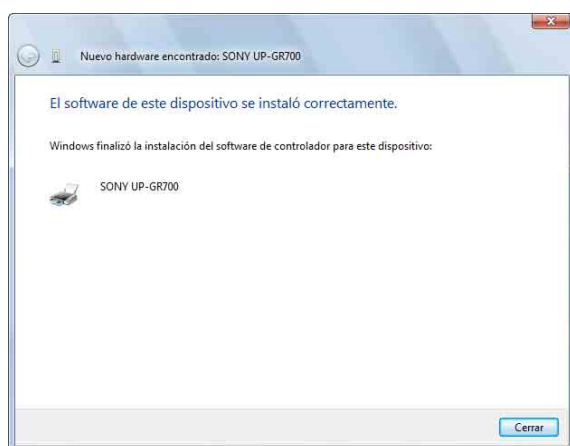

12 Haga clic en [Cerrar].

De este modo finaliza la instalación del controlador de la impresora.


Desinstalación del controlador de la impresora en Windows Vista

En esta sección se describe cómo eliminar el controlador de la impresora.


Notas

- Al iniciar el procedimiento de desinstalación, la UP-GR700 no debe estar conectada al ordenador. Si aparece el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado], desconecte el cable que conecta el ordenador a la UP-GR700, haga clic en [Cancelar] en todas las pantallas para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, inicie el procedimiento de desinstalación de nuevo.
- Si hay varias partes del controlador de impresora instaladas en el ordenador al efectuar la desinstalación, se desinstalarán los controladores de impresora (iconos de impresora) de todas las UP-GR700 que esté utilizando.

- 1 Haga clic en [Iniciar], seleccione [Panel de control] y, a continuación, seleccione [Impresoras].
- 2 Haga clic con el botón derecho en el nombre de la impresora que desea eliminar para que aparezca el menú de opciones y, a continuación, haga clic en [Eliminar].

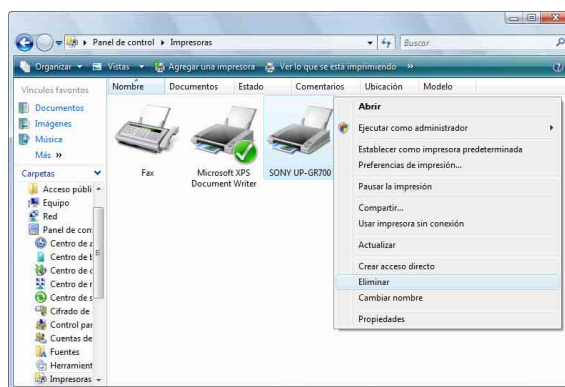


Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

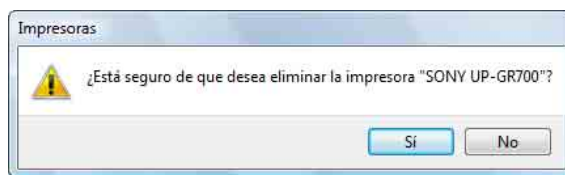


- 3 Haga clic en [Sí].

- 4 Haga clic con el botón derecho en cualquier parte dentro de la ventana (excepto en los iconos de las impresoras) para que aparezca un menú de opciones, seleccione [Ejecutar como administrador] y, a continuación, haga clic en [Propiedades del servidor].

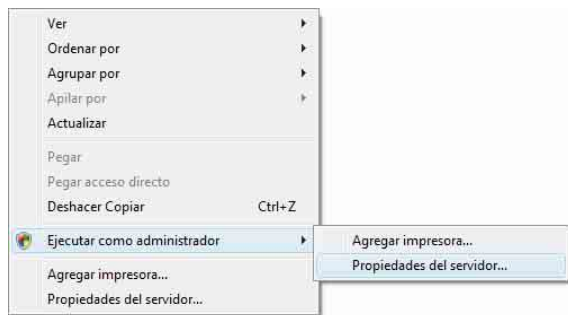


Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

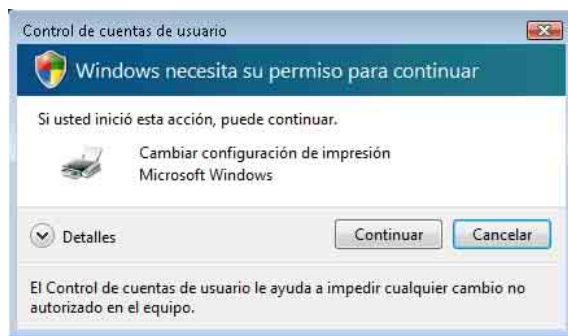


- 5 Haga clic en [Continuar].

Aparecen las propiedades del servidor de impresión.

- 6 Haga clic en la ficha [Controladores], seleccione el nombre de la impresora que desea eliminar de la lista [Controladores de impresora instalados] y, a continuación, haga clic en [Quitar].

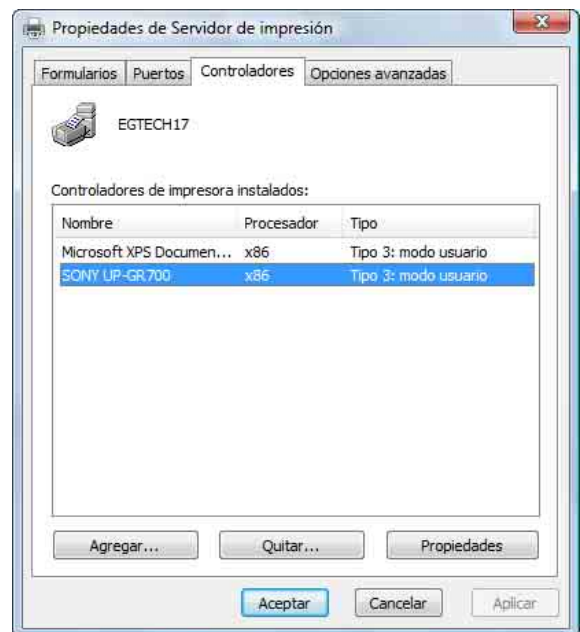


Aparecerá la pantalla [Quitar el controlador y el paquete].

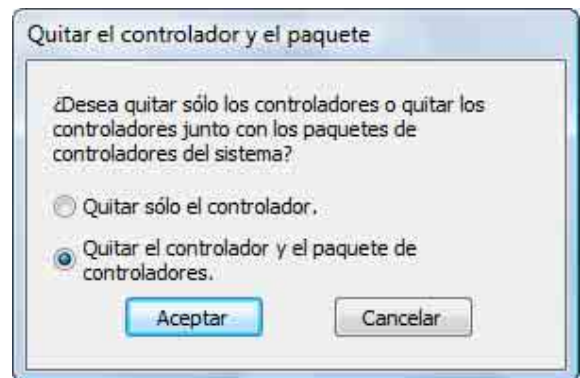

- 7 Seleccione [Quitar el controlador y el paquete de controladores.] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

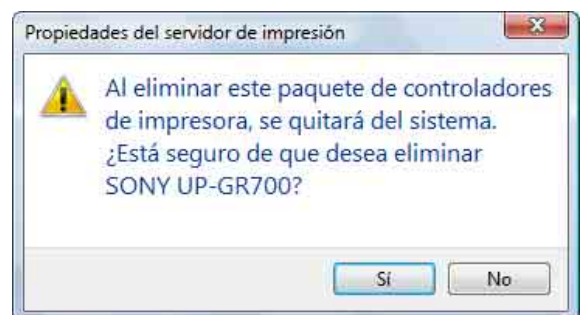

- 8 Haga clic en [Sí].
Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.



- 9 Haga clic en [Eliminar].

La pantalla cambiará del modo siguiente.



- 10 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la pantalla.

Nota

Es posible que aparezca la advertencia [El controlador de impresora especificado ya está en uso.]. Si aparece este mensaje, reinicie el ordenador y realice el proceso de desinstalación nuevamente.

Configuración de la impresora en Windows Vista

Antes de imprimir desde una aplicación, debe realizar los ajustes de las propiedades de la impresora necesarios.


Para que se muestre la ventana de propiedades de la impresora, utilice uno de los siguientes métodos.

- Haga clic en [Inicio] y, a continuación, en [Panel de control]. Seleccione [Impresoras]. Seleccione el icono de la impresora UP-GR700 y haga clic en [Seleccionar preferencias de impresión] en la barra de herramientas. Los ajustes realizados de esta manera se utilizan como ajustes predeterminados al imprimir desde aplicaciones.
- En el menú [Archivo] de la aplicación, haga clic en el elemento que permite realizar ajustes en la impresora. Los ajustes realizados de este modo únicamente serán válidos hasta que se cierre la aplicación.

Esta sección describe los ajustes disponibles en las fichas de [Preferencias de impresión de UP-GR700].

Ficha [Presentación]

Esta ficha se utiliza para llevar a cabo los ajustes de impresión básicos.

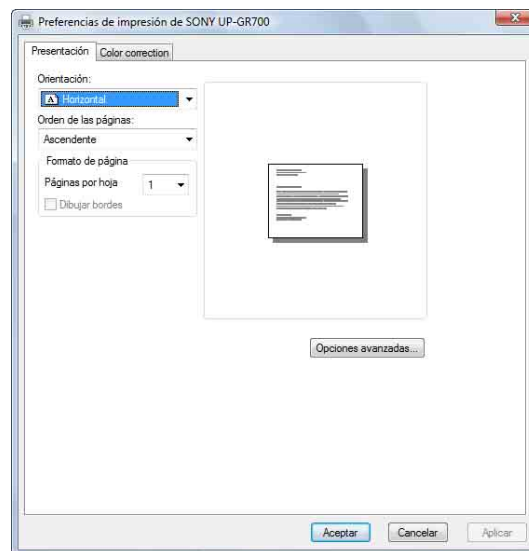

Orientación

Seleccione [Vertical] u [Horizontal].

Orden de las páginas

Para el orden de impresión, seleccione [Ascendente] o [Descendente].

Páginas por hoja

Seleccione el número de páginas que desee imprimir en cada hoja.

Dibujar bordes


Activado cuando [Páginas por hoja] está ajustado en 2 o más. Haga clic si deben dibujarse bordes para páginas.

Opciones avanzadas

Haga clic aquí para visualizar la ventana [Opciones avanzadas].

Ficha [Color correction]

Esta ficha se utiliza para realizar los ajustes de color, brillo y demás ajustes relacionados con las imágenes.

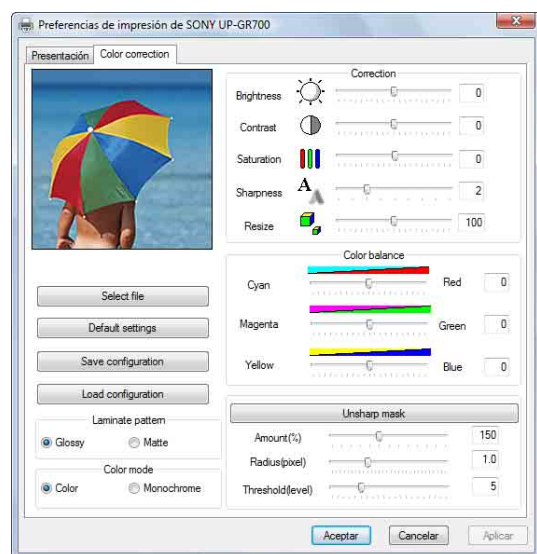

Select file

Haga clic en esta opción para seleccionar la imagen que aparece en la esquina superior izquierda de la ventana.

Notas

- Para el formato de imagen, solo es posible seleccionar los archivos 24 bits a todo color. El tamaño de la imagen no está limitado.
- La ventana muestra una zona de puntos de 256 × 256 en el centro de la imagen seleccionada.

Default settings

Haga clic aquí para restablecer todos los ajustes modificados en la ficha [Color correction] a sus valores predeterminados.

Save configuration

Haciendo clic en esta opción podrá guardar la configuración de la ficha [Color correction] como un archivo.

Load configuration

Haga clic aquí para restaurar la configuración guardada en la ficha [Color correction].

Laminate pattern

Seleccione [Glossy] o [Matte] para el acabado de laminación.

Color mode

Seleccione [Color] o [Monochrome] para el modo de color.

Correction

Esta opción permite realizar ajustes en la imagen. Ajuste los elementos (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness y Resize) deslizando sus correspondientes barras de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Como alternativa, también puede introducir los valores directamente en los campos de entrada.

Color balance

Mueva las respectivas barras hacia la izquierda o la derecha para ajustar los elementos. También es posible introducir los valores directamente en los campos de entrada.


Unsharp mask

Haga clic aquí para activar o desactivar la máscara de desenfoque.

Si la unsharp mask está activada, ajuste los elementos (Amount, Radius y Threshold) deslizando sus correspondientes barras de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Como alternativa, también puede introducir los valores directamente en los campos de entrada.

Ventana [Opciones avanzadas]

Esta ventana se utiliza para realizar ajustes en el documento, como el tamaño del papel, el número de copias y el diseño de páginas por hoja.

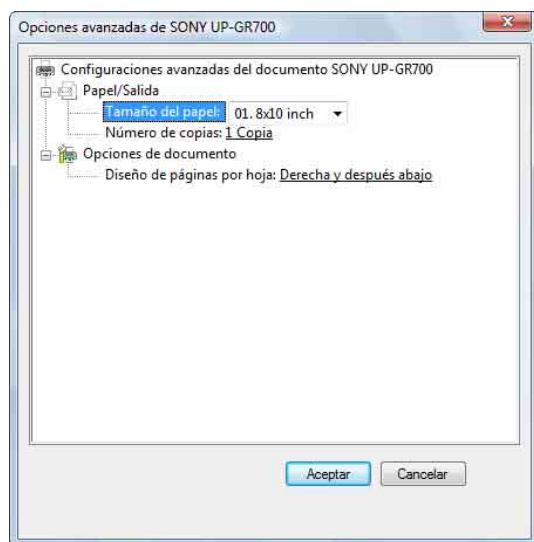

Tamaño del papel

Seleccione [01. 8×10 inch], [02. 8×12 inch], [03. 8×8 inch], [04. 8×5 inch×2], [05. 8×6 inch×2] o [06. 8×4 inch×3] como tamaño de papel para la impresión.

Nota

Si se selecciona [05. 8×6 inch×2] o [06. 8×4 inch×3], el tamaño real impreso será aproximadamente de 8×5,9 inch×2 y 8×3,87 inch×3 respectivamente.

Número de copias

Haga clic aquí para definir el número de copias que desee imprimir. Dicho número puede oscilar entre 1 y 20.

Intercalado

Defina si las páginas del documento se recopilan o imprimen de forma independiente cuando se imprimen varias copias.

Este elemento únicamente se encuentra activo cuando [Número de copias] se ha definido para un número entre 2 y 20.

Diseño de páginas por hoja

Seleccione [Derecha y después abajo], [Abajo y después derecha], [Izquierda y después abajo] o [Abajo y después izquierda] como presentación de las páginas a imprimir.

Instalación del controlador de la impresora en Windows XP

Antes de la instalación

Acerca de las actualizaciones de la versión

En caso de que esté actualizando un controlador de impresora, elimine el anterior antes de iniciar la instalación.


Para obtener más información acerca del procedimiento de eliminación del controlador de impresora, consulte la sección “Desinstalación del controlador de la impresora en Windows XP” de esta guía.


Si la instalación no se realiza con éxito o se cancela, reinicie el ordenador antes de volver a intentarlo.

Nota

Asegúrese de reiniciar el ordenador después de instalar o desinstalar el controlador de la impresora. En caso contrario, se producirá un funcionamiento inestable del mismo.

Conexión USB 2.0


La impresora UP-GR700 es compatible con USB 2.0. Sin embargo, si el ordenador o el concentrador USB no son compatibles con USB 2.0, se mostrará el siguiente mensaje al conectar la impresora UP-GR700. Haga clic en  para cerrar el mensaje.

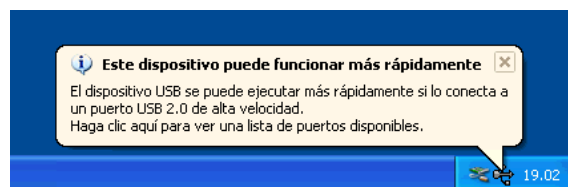

Acerca de las opciones de firma del controlador

El presente controlador de impresora no ha superado la prueba del logotipo de Windows, por lo tanto, al intentar instalarlo, es posible que aparezca un mensaje de error que le impida hacerlo.

En el cuadro de diálogo [Opciones de firma del controlador], seleccione [Ninguna] o [Advertir] en el cuadro de grupo [¿Qué acción desea que realice Windows?]. Si selecciona [Bloquear], no podrá instalar el controlador de impresora.

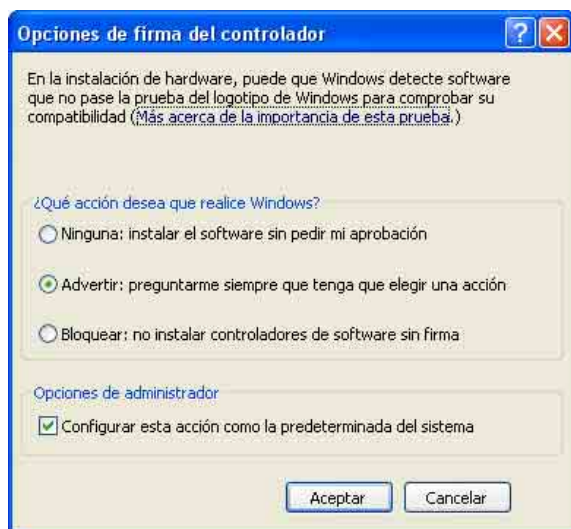

Abra el cuadro de diálogo [Opciones de firma del controlador] del modo siguiente:

- ① En el menú [Inicio], haga clic en [Panel de control].
- ② Haga doble clic en [Sistema].
Aparece el cuadro de diálogo [Propiedades del sistema].
- ③ Haga clic en la ficha [Hardware].
- ④ Haga clic en el botón [Firma de controladores].

En todas las explicaciones de esta guía se presupone que el ajuste de este cuadro de diálogo es [Advertir].

Conexión de varias impresoras

Al conectar varias impresoras UP-GR700 a un ordenador que dispone de Windows XP, instale el controlador de cada impresora de acuerdo con las explicaciones facilitadas en “Instalación en Windows XP”.


Nota

Para instalar el resto de impresoras, instale cada una por separado.

Instalación en Windows XP

- 1 Conecte la impresora UP-GR700 (solamente una) cuyo controlador desee instalar en el ordenador.
- 2 Encienda la impresora UP-GR700 conectada.
- 3 Encienda el ordenador e inicie sesión como administrador del sistema o como miembro del grupo de administradores.

Aparecerá el mensaje [Asistente para hardware nuevo encontrado].

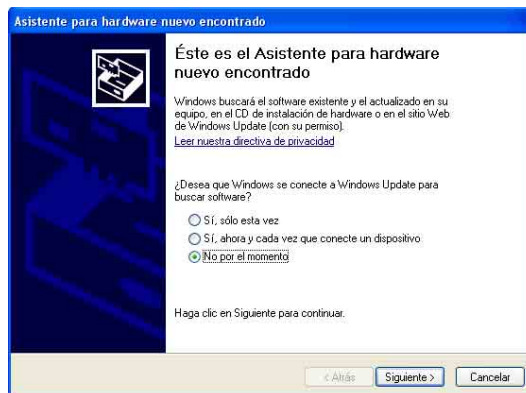

- Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo encontrado] se parece a la mostrada en el paso 3, diríjase al paso 4.
- Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo encontrado] es diferente a la mostrada en el paso 3, diríjase al paso 5.
- Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo encontrado] no aparece, lleve a cabo los pasos que se describen a continuación con la impresora UP-GR700 cuyo controlador desea instalar encendida y conectada al equipo. (No debe haber otras impresoras USB o impresoras UP-GR700 instaladas previamente conectadas en este momento).

- ① Haga clic en [Inicio] y seleccione [Panel de control].
- ② Haga doble clic en [Sistema].
Aparece el cuadro de diálogo [Propiedades del sistema].
- ③ Haga clic en la pestaña [Hardware].
- ④ Haga clic en [Administrador de dispositivos].
Aparece la ventana [Administrador de dispositivos].
- ⑤ Haga clic en [+] situado a la izquierda de [Controladoras de bus serie universal (USB)].

⑥ Haga clic con el botón derecho en [Compatibilidad con impresoras USB] y abra las propiedades. Compruebe que [UP-GR700] está seleccionado en [Ubicación] y, a continuación, seleccione [Desinstalar] en el menú [Acción].


⑦ Reinicie el equipo.
Aparecerá el mensaje [Asistente para hardware nuevo encontrado].

4 Haga clic en [No por el momento] y, a continuación, en [Siguiente].



5 Seleccione [Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)] y, a continuación, [Siguiente].

La pantalla cambiará del modo siguiente.

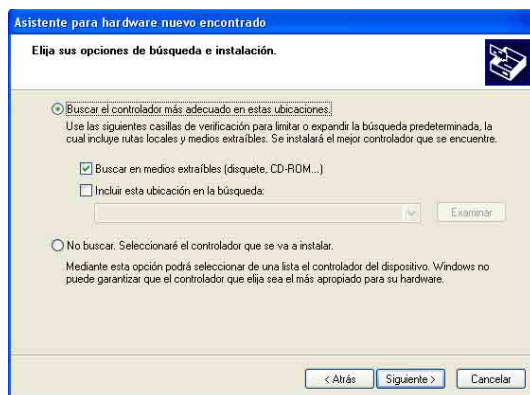

6 Seleccione [Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones.], elija [Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)] y, a continuación, inserte el CD-ROM suministrado "PRINTER DRIVER & INSTRUCTIONS FOR USE UP-GR700" en la unidad de CD-ROM.

7 Haga clic en [Siguiente].

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.



8 Haga clic en [Continuar].

Una vez copiados los archivos, aparecerá la siguiente pantalla.



9 Haga clic en [Finalizar].

10 Reinicie el ordenador.

De este modo finaliza la instalación del controlador de la impresora.


Desinstalación del controlador de la impresora en Windows XP

En esta sección se describe cómo eliminar el controlador de la impresora.

Notas


- Al iniciar el procedimiento de desinstalación, la UP-GR700 no debe estar conectada al ordenador. Si aparece la pantalla [Asistente para hardware nuevo encontrado]; desconecte el cable que conecta el ordenador y la UP-GR700, haga clic en [Cancelar] en todas las pantallas para finalizar el asistente y, a continuación, inicie el procedimiento de desinstalación de nuevo.
- Si el procedimiento de desinstalación se efectúa con varias partes del controlador de la impresora instalados, se desinstalarán todos los controladores de las impresoras UP-GR700 (iconos de impresora).
- Si aparece el mensaje de advertencia “The specified printer driver is currently in use.”, reinicie el ordenador y lleve a cabo de nuevo el procedimiento de desinstalación.

- 1 Apague la impresora UP-GR700 y desconecte el cable existente entre el ordenador y la impresora.
- 2 Encienda el ordenador e inicie sesión como administrador del sistema o como miembro del grupo de administradores.
- 3 Haga clic en [Inicio] y seleccione [Panel de control]. A continuación, seleccione [Impresoras y faxes].

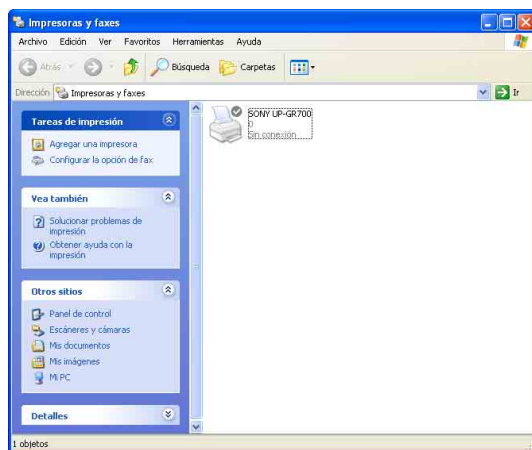


- 4 Seleccione el nombre de la impresora que desee eliminar y, a continuación, seleccione [Eliminar] del menú [Archivo].

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

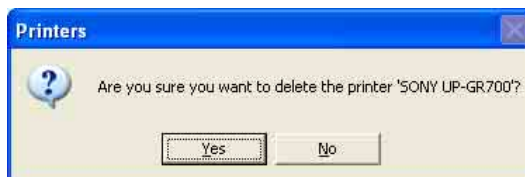


- 5 Haga clic en [Yes].
- 6 Seleccione [Propiedades del servidor] del menú [Archivo].

Aparecerá la ventana [Propiedades de Servidor de impresión].

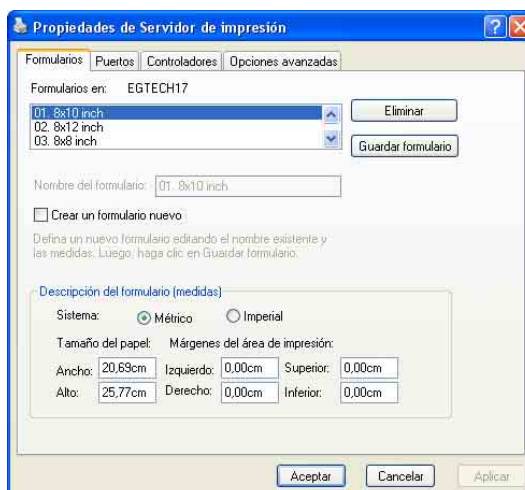

- 7 Haga clic en la ficha [Controladores], seleccione el nombre de la impresora que desee eliminar de la lista [Controladores de impresora instalados] y, a continuación, haga clic en [Quitar].

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

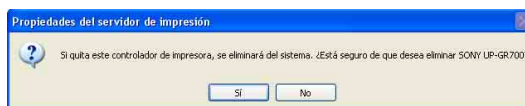

- 8 Haga clic en [Sí].
- 9 Haga clic en la opción [OK] de la ventana [Propiedades de Servidor de impresión].

De este modo se completa el procedimiento de desinstalación del controlador de la impresora.

Configuración de la impresora en Windows XP

Antes de imprimir desde una aplicación, debe realizar los ajustes de las propiedades de la impresora necesarios.


Para que se muestre la ventana de propiedades de la impresora, utilice uno de los siguientes métodos.

- Haga clic en [Inicio] y, a continuación, en [Panel de control]. Seleccione [Impresoras y faxes]. Seleccione el icono de la impresora UP-GR700 y haga clic en [Pausar la impresión] en el menú [Archivo]. Los ajustes realizados de esta manera se utilizan como ajustes predeterminados al imprimir desde aplicaciones.
- En el menú [Archivo] de la aplicación, haga clic en el elemento que permite realizar ajustes en la impresora. Los ajustes realizados de este modo únicamente serán válidos hasta que se cierre la aplicación.

Esta sección describe los ajustes disponibles en las fichas de [Preferencias de impresión de SONY UP-GR700].

Ficha [Presentación]

Esta ficha se utiliza para llevar a cabo los ajustes de impresión básicos.

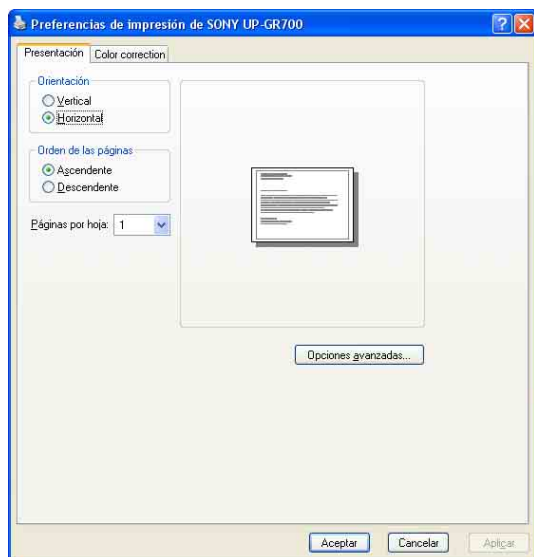

Orientación

Seleccione [Vertical] u [Horizontal].

Orden de las páginas

Para el orden de impresión, seleccione [Ascendente] o [Descendente].

Páginas por hoja


Seleccione el número de páginas que desee imprimir en cada hoja.

Opciones avanzadas

Haga clic aquí para visualizar la ventana [Opciones avanzadas].

Ficha [Color correction]

Esta ficha se utiliza para realizar los ajustes de color, brillo y demás ajustes relacionados con las imágenes.

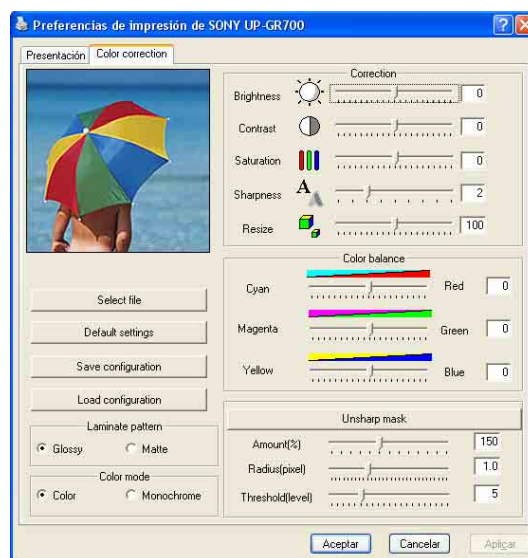

Select file

Haga clic en esta opción para seleccionar la imagen que aparece en la esquina superior izquierda de la ventana.

Notas

- Para el formato de imagen, solo es posible seleccionar los archivos 24 bits a todo color. El tamaño de la imagen no está limitado.
- La ventana muestra una zona de puntos de 256 × 256 en el centro de la imagen seleccionada.

Default settings

Haga clic aquí para restablecer todos los ajustes modificados en la ficha [Color correction] a sus valores predeterminados.

Save configuration

Haciendo clic en esta opción podrá guardar la configuración de la ficha [Color correction] como un archivo.

Load configuration

Haga clic aquí para restaurar la configuración guardada en la ficha [Color correction].

Laminate pattern

Seleccione [Glossy] o [Matte] para el acabado de laminación.

Color mode

Seleccione [Color] o [Monochrome] para el modo de color.

Correction

Esta opción permite realizar ajustes en la imagen.

Ajuste los elementos (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness y Resize) deslizando sus correspondientes barras de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Como alternativa, también puede introducir los valores directamente en los campos de entrada.

Color balance

Mueva las respectivas barras hacia la izquierda o la derecha para ajustar los elementos. También es posible introducir los valores directamente en los campos de entrada.

Unsharp mask

Haga clic aquí para activar o desactivar la máscara de desenfoque.

Si la unsharp mask está activada, ajuste los elementos (Amount, Radius y Threshold) deslizando sus correspondientes barras de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Como alternativa, también puede introducir los valores directamente en los campos de entrada.

Ventana [Opciones avanzadas]

Esta ventana se utiliza para realizar ajustes en el documento, como el tamaño del papel y la cantidad de copias.



Tamaño del papel

Seleccione [01. 8×10 inch], [02. 8×12 inch], [03. 8×8 inch], [04. 8×5 inch×2], [05. 8×6 inch×2] o [06. 8×4 inch×3] como tamaño de papel para la impresión.

Nota

Si se selecciona [05. 8×6 inch×2] o [06. 8×4 inch×3], el tamaño real impreso será aproximadamente de 8×5,9 inch×2 y 8×3,87 inch×3 respectivamente.

Número de copias

Haga clic aquí para definir el número de copias que desee imprimir. Dicho número puede oscilar entre 1 y 20.

Intercalado

Defina si las páginas del documento se recopilan o imprimen de forma independiente cuando se imprimen varias copias.


Este elemento únicamente se encuentra activo cuando [Número de copias] se ha definido para un número entre 2 y 20.

Acerca del área de impresión

Cuando imprima con la UP-GR700, el área que rodea los datos de la imagen se reducirá aproximadamente 1,9 mm (22 puntos). Prepare la imagen para imprimirla de manera que quede espacio para la eliminación del área. Para imprimir dos o tres imágenes, necesitará alinearlas y prepararlas como datos de una imagen.

Impresión de una imagen

Imprime una imagen. Si imprime utilizando este método, ajuste la imagen al tamaño (C x D) como se indica en la figura/tabla siguiente. El tamaño real de impresión será A x B.

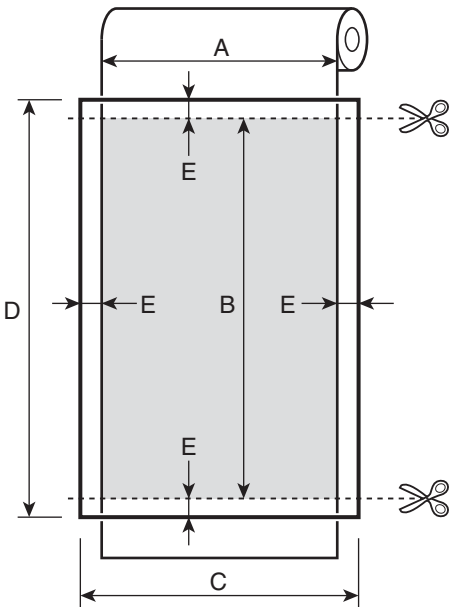

A/B/C/D : Consulte la tabla.

E : 22 puntos


Ajuste del tamaño del papel	Tamaño de la imagen (A x B)	Tamaño de la imagen (C x D)
[01. 8x10 inch]	203 x 254 mm (8 x 10 pulgadas) (2400 x 3000 puntos)	2444 x 3044 puntos
[02. 8x12 inch]	203 x 305 mm (8 x 12 pulgadas) (2400 x 3600 pulgadas)	2444 x 3644 puntos
[03. 8x8 inch]	203 x 203 mm (8 x 8 pulgadas) (2400 x 2400 pulgadas)	2444 x 2444 pulgadas

Impresión de dos imágenes

Imprime dos imágenes a la vez. Necesitará alinear ambas imágenes y prepararlas como datos de una imagen. Ajuste la imagen al tamaño (C x D) como se indica en la figura/tabla siguiente. El tamaño real de impresión será A x B.

Nota

Entre cada imagen se requieren espacios en blanco (16 puntos) (indicado como F en la figura). No se imprimirá nada aun cuando existan datos en los espacios.

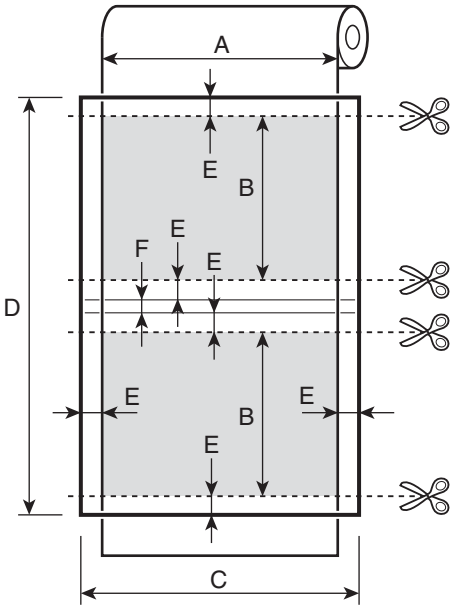

A/B/C/D : Consulte la tabla.

E : 22 puntos

F : 16 puntos


Ajuste del tamaño del papel	Tamaño de la imagen (A x B)	Tamaño de la imagen (C x D)
[04. 8x5 inchx2]	203 x 127 mm (8 x 5 pulgadas) (2400 x 1500 puntos)	2444 x 3104 puntos
[05. 8x6 inchx2]	203 x 150 mm (8 x 5,9 pulgadas) (2400 x 1770 puntos)	2444 x 3644 puntos

Impresión de dos imágenes

Imprime tres imágenes a la vez. Necesitará alinear las tres imágenes y prepararlas como datos de una imagen. Ajuste la imagen al tamaño (C × D) como se indica en la figura/tabla siguiente. El tamaño real de impresión será A × B.

Nota

Entre cada imagen se requieren espacios en blanco (16 puntos) (indicado como F en la figura). No se imprimirá nada aun cuando existan datos en los espacios.

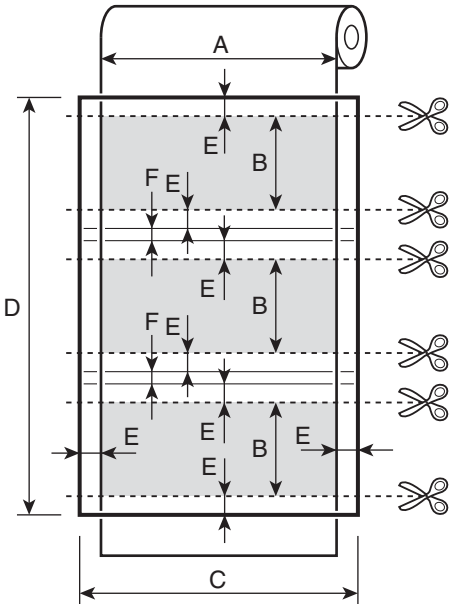

A/B/C/D : Consulte la tabla.
E : 22 puntos
F : 16 puntos

Ajuste del tamaño del papel	Tamaño de la imagen (A × B)	Tamaño de la imagen (C × D)
[06. 8×4 inch×3]	203 × 98 mm (8 × 3,87 pulgadas) (2400 × 1160 puntos)	2444 × 3644 puntos