

SONY®

Printer Driver

Installationsanleitung

In dieser Anleitung wird die Installation des Druckertreibers für Windows Vista und Windows XP beschrieben.

Vor der Verwendung der Software

Lesen Sie vor der Verwendung des Druckertreibers unbedingt die „ReadMe“-Datei.

UP-GR700

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Betriebssystem-Voraussetzungen | 3 |
| Über dieses Dokument | 3 |
| Installieren des Druckertreibers unter | |
| Windows Vista | 4 |
| Vor der Installation | 4 |
| Installation unter Windows Vista | 4 |
| Deinstallieren von des Druckertreibers unter | |
| Windows Vista | 7 |
| Drucker unter Windows Vista konfigurieren | 9 |
| Druckertreiber unter Windows XP | |
| installieren | 11 |
| Vor der Installation | 11 |
| Installation unter Windows XP | 12 |
| Druckertreiber unter Windows XP | |
| deinstallieren | 14 |
| Drucker unter Windows XP konfigurieren | 15 |
| Informationen zum bedruckbaren Bereich | 17 |
| Ein Bild drucken | 17 |
| Zwei Bilder drucken | 17 |
| Drei Bilder drucken | 18 |

Microsoft und Windows sind eingetragene
Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Andere in diesem Dokument erwähnte Produkt- oder
Firmennamen sind ebenfalls Warenzeichen oder
registrierte Warenzeichen.

Betriebssystem-Voraussetzungen

Für den Druckertreiber müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Computer mit Microsoft Windows Vista (die 64-Bit-Edition wird nicht unterstützt)
- oder
- Computer mit Microsoft Windows XP Professional/Home Edition

Hinweise zu USB 2.0

- Der UP-GR700 erfüllt die USB 2.0-Spezifikationen.
- USB 2.0 ist vollständig abwärtskompatibel mit USB 1.1.
- USB 2.0 unterstützt den Betrieb mit „Full Speed“ und „Hi-Speed“.
- Mit USB 1.1 ist das Anschließen und Betreiben von Geräten mit „Full Speed“ möglich. Für den Betrieb mit „Hi-Speed“ sind folgende Voraussetzungen erforderlich.
 - Computer
Computer mit Unterstützung von Hi-Speed-USB (USB-2.0-konform)*
 - Betriebssystem
Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XP Professional/Microsoft Windows XP Home Edition
 - USB 2.0-Treiber
USB 2.0-Gerätetreiber von Microsoft Corporation (Betrieb mit anderen USB 2.0-Treibern wird nicht garantiert.)
 - Zertifiziertes USB 2.0-Kabel

* Kompatibilität mit allen USB 2.0-Geräten, USB 2.0-Erweiterungskarten und -platinen kann nicht garantiert werden.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Computer nicht in den Schlafmodus, Standbymodus oder in den Ruhezustand wechseln, solange der UP-GR700 angeschlossen ist. Andernfalls wird der störungsfreie Betrieb nicht gewährleistet.

Über dieses Dokument

Die in diesem Dokument enthaltene Erklärung der Bedienschritte in der Systemsteuerung setzt voraus, dass Sie in der klassischen Ansicht von Windows arbeiten. Um in die klassische Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung] und dann links im Bildschirm bei den Eigenschaften der Systemsteuerung auf [klassische Ansicht] (unter Windows Vista) oder [Zur klassischen Ansicht wechseln] (unter Windows XP).

Installieren des Druckertreibers unter Windows Vista

Vor der Installation


Hinweise zu Versionsaktualisierungen


Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen, entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den neuen installieren.

Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden Sie im Abschnitt „Deinstallieren von des Druckertreibers unter Windows Vista“ in dieser Anleitung.

Wird die Installation abgebrochen oder schlägt sie fehl, starten Sie den Computer vor der erneuten Installation neu.

USB 2.0-Verbindung

Der UP-GR700 erfüllt die USB 2.0-Spezifikationen. Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht USB 2.0-kompatibel ist, wird beim Anschließen des UP-GR700 die nachfolgend dargestellte Meldung angezeigt. Klicken Sie auf , um die Meldung zu schließen.

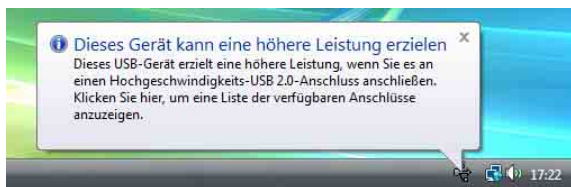

Mehrere Drucker anschließen

Wenn Sie mehrere UP-GR700-Drucker nutzen möchten, schließen Sie die weiteren Drucker einfach an: Die Installation erfolgt automatisch.

Hinweis

Installieren Sie die nachfolgenden Drucker jeweils einzeln.


Druckertreiber für Windows 2000/Windows XP

Da die vorherige Version des Druckertreibers für Windows 2000/Windows XP von Windows Vista nicht unterstützt wird, ist ein ordnungsgemäßer Druck nicht möglich, wenn dieser unter Windows Vista installiert wird. Wenn Sie unter Windows Vista die Version des Druckertreibers für Windows 2000/Windows XP installiert haben, befolgen Sie deinstallieren Sie den vorherigen Treiber entsprechend der Anleitung im Abschnitt „Deinstallieren von des Druckertreibers unter Windows Vista“ dieses Dokuments, und installieren Sie dann die aktuelle Version des Druckertreibers mit Unterstützung für Windows Vista.

Installation unter Windows Vista

- 1 Schließen Sie den UP-GR700, dessen Treiber installiert werden soll, an.
- 2 Schalten Sie den angeschlossenen UP-GR700 ein.
- 3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird angezeigt.

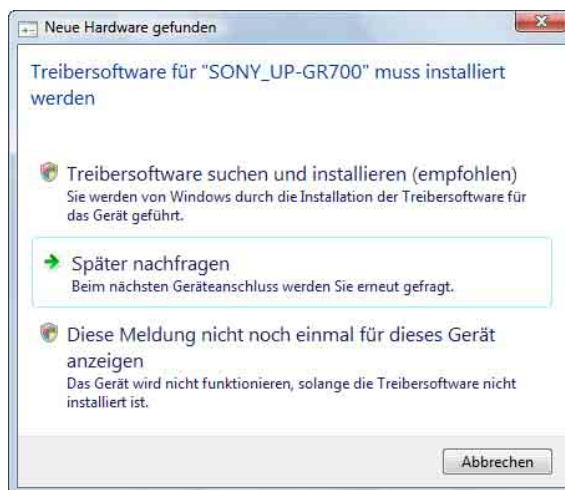


Wird das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] nicht angezeigt, schließen Sie den UP-GR700, dessen Treiber installiert werden soll, an den Computer an, schalten den Drucker ein und gehen wie nachfolgend beschrieben vor. (Andere USB-Drucker oder zuvor installierte UP-GR700-Drucker dürfen hierzu nicht angeschlossen sein.)

- ① Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie die Option [Systemsteuerung].
- ② Doppelklicken Sie auf [System].


- ③ Klicken Sie auf [Geräte-Manager].
Das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] wird angezeigt.
- ④ Klicken Sie auf [Fortsetzen].
Das Fenster [Geräte-Manager] wird angezeigt.
- ⑤ Klicken Sie links neben [USB-Controller] auf [+].
- ⑥ Wählen Sie im Menü [Aktion] die Option [USB-Druckunterstützung] und dann [Deinstallieren].
- ⑦ Starten Sie den Computer neu.
Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird angezeigt.

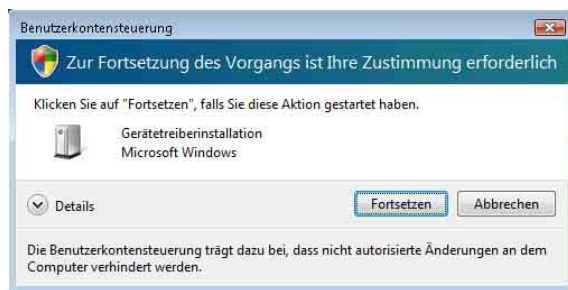

- 5 Klicken Sie auf [Fortsetzen].
- 6 Klicken Sie auf [Nicht online suchen.], wenn das nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt wird.

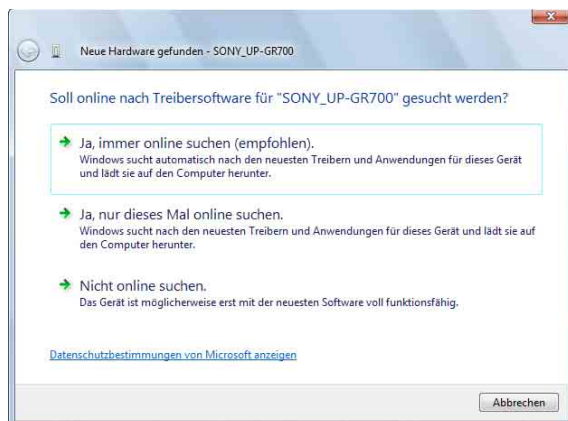

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird angezeigt.




Von hier an hängt der weitere Verlauf der Installation davon ab, ob Sie die beiliegende CD-ROM verwenden oder einen aus dem Internet heruntergeladenen Treiber installieren.

Installation mit der beiliegenden CD-ROM

- 7 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in das CD-Laufwerk ein.

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird angezeigt.

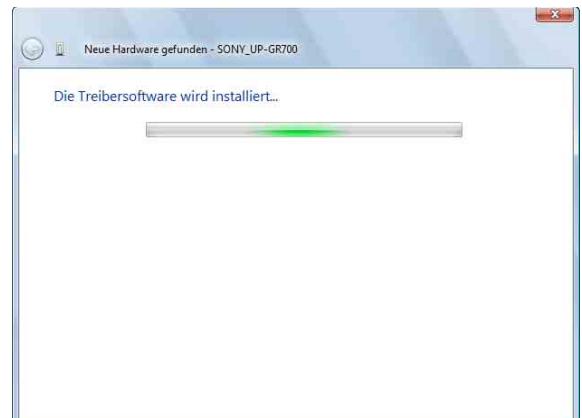


Wenn die Suche nach der Software abgeschlossen ist, wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld angezeigt.




- 8 Klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren].

Das Dialogfeld wird geschlossen, und das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird erneut angezeigt.

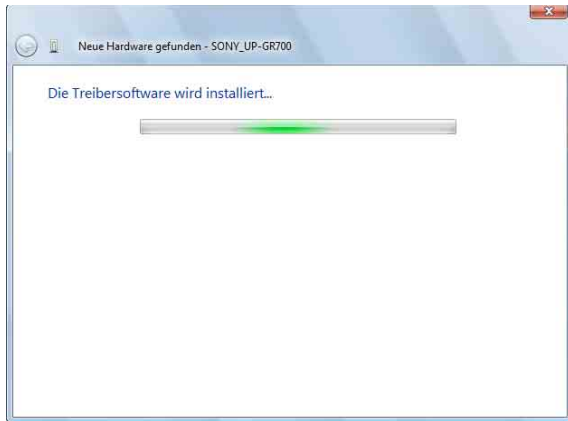

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

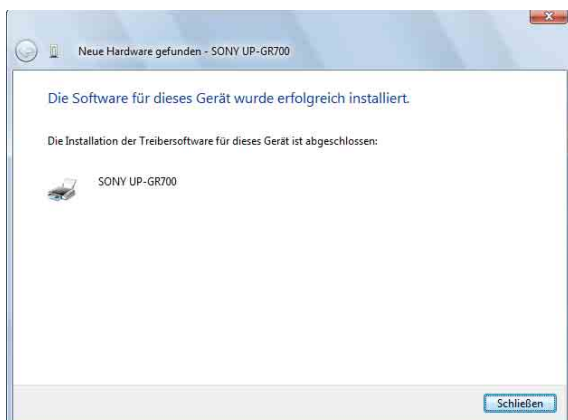


- 9 Klicken Sie auf [Schließen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.

Installation ohne die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM


- 7 Klicken Sie auf [Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird angezeigt.

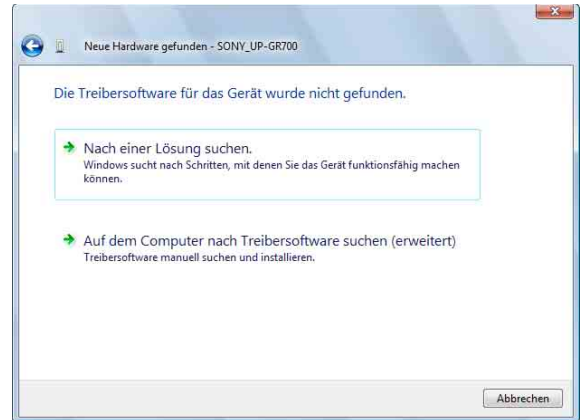

- 8 Klicken Sie auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird angezeigt.

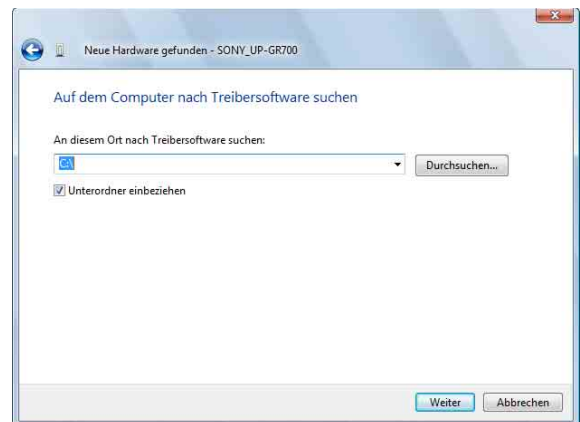

- 9 Klicken Sie auf [Durchsuchen], um das Dialogfeld [Ordner suchen] zu öffnen. Geben Sie den Ordner an, in den die Installationsdatei nach dem Herunterladen extrahiert wurde, und klicken Sie dann auf [OK], um das Dialogfeld [Ordner suchen] zu schließen.


10 Klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird angezeigt.




11 Klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren].

Das Dialogfeld wird geschlossen, und das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird erneut angezeigt.

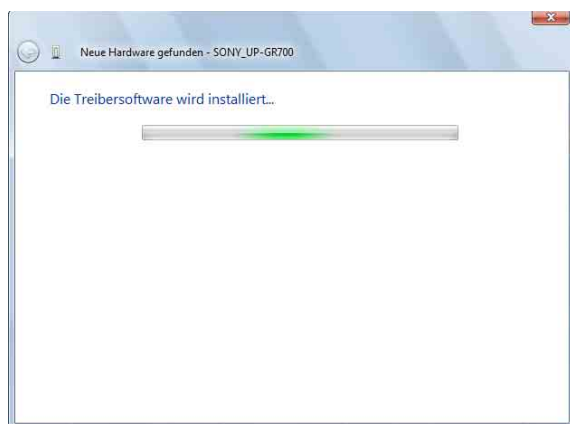

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

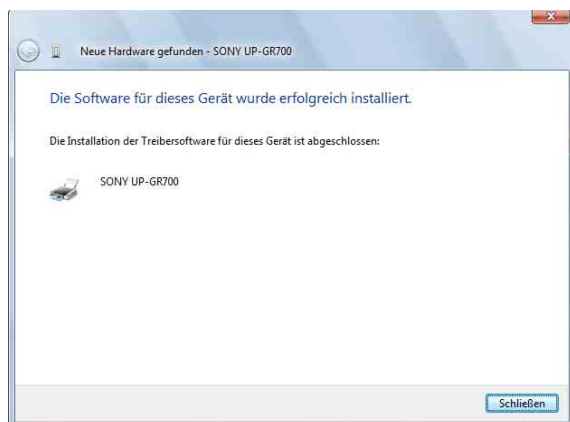

12 Klicken Sie auf [Schließen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.

Deinstallieren von des Druckertreibers unter Windows Vista


In diesem Abschnitt wird die Deinstallation des Druckertreibers beschrieben.

Hinweise

- Wenn der Deinstallationsvorgang gestartet wird, darf der UP-GR700 nicht am Computer angeschlossen sein. Wenn das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] angezeigt wird, trennen Sie die Kabelverbindung zwischen UP-GR700 und Computer. Klicken Sie in allen angezeigten Fenstern auf [Abbrechen], um das Dialogfeld zu schließen, und starten Sie dann die Deinstallation erneut.
- Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des Druckertreibers installiert sind, werden bei der Deinstallation die Druckertreiber für alle verwendeten UP-GR700-Drucker deinstalliert.

1 Klicken Sie auf [Start], und wählen Sie dann [Systemsteuerung] und [Drucker].

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers, den Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf [Löschen].

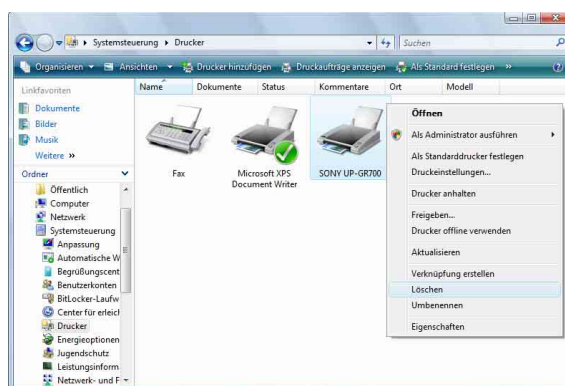


Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird angezeigt.




3 Klicken Sie auf [Ja].

- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Fenster (außer auf die Druckersymbole), um das Kontextmenü anzuzeigen, wählen Sie den Befehl [Als Administrator ausführen], und klicken Sie dann auf [Servereigenschaften].

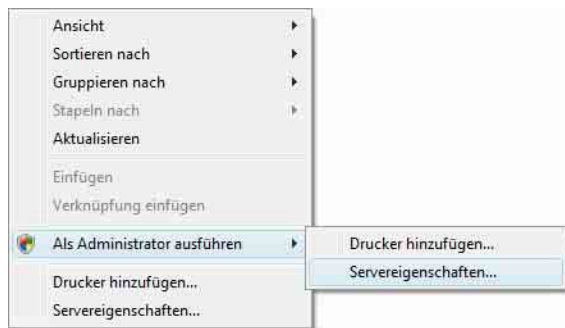


Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird angezeigt.

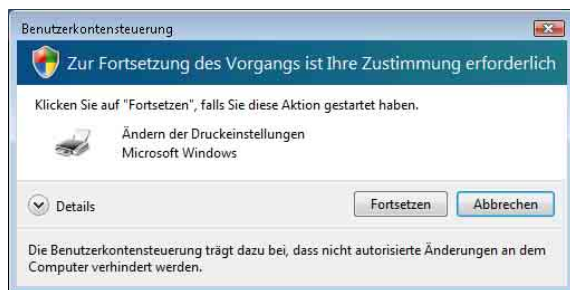


- 5 Klicken Sie auf [Fortsetzen].

Die Eigenschaften des Druckservers werden angezeigt.

- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber], wählen Sie den Namen des Druckers, den Sie aus der Liste [Installierte Druckertreiber] löschen möchten, und klicken Sie dann auf [Entfernen].

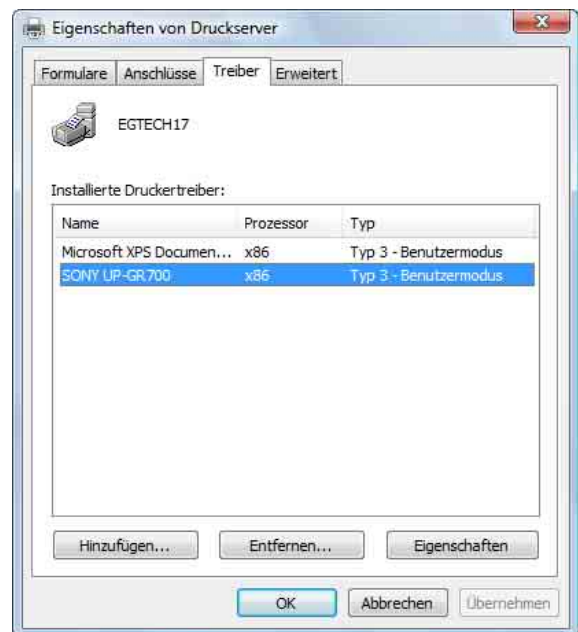


Der Bildschirm [Treiber und Paket entfernen] wird angezeigt.

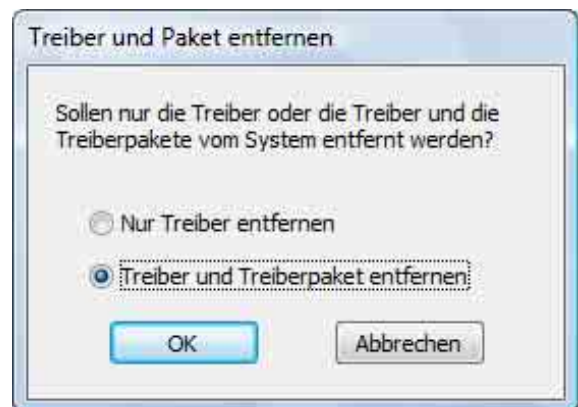


- 7 Wählen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen], und klicken Sie auf [OK].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird angezeigt.

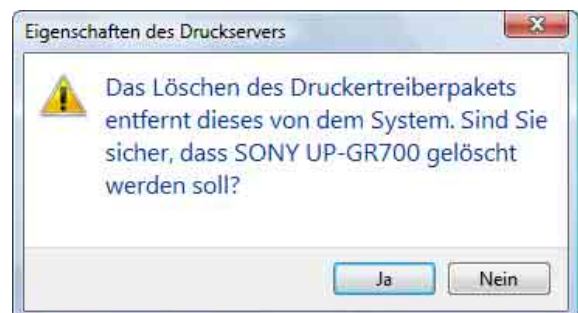

8 Klicken Sie auf [Ja].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird angezeigt.

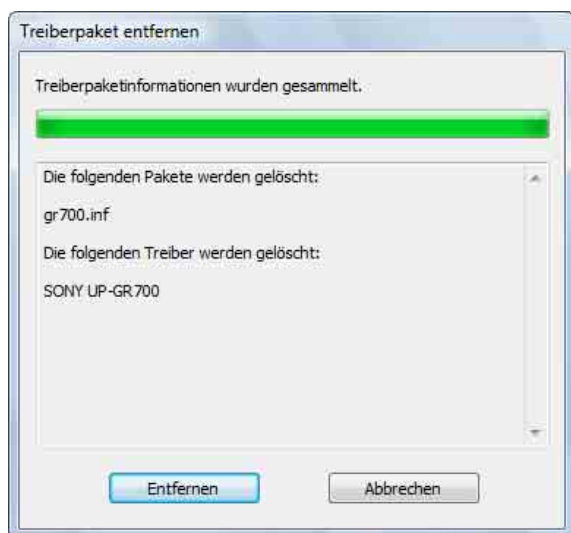

9 Klicken Sie auf [Entfernen].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird angezeigt.



10 Klicken Sie auf [OK], um den Bildschirm zu schließen.

Hinweis

Möglicherweise wird die Warnung [Der angegebene Druckertreiber ist in Verwendung.] angezeigt. Wenn diese Meldung angezeigt wird, starten Sie den Computer neu, und führen Sie die Deinstallation erneut aus.

Drucker unter Windows Vista konfigurieren

Bevor Sie aus einer Anwendung heraus drucken, müssen Sie einige Druckereinstellungen vornehmen.


Zum Aufrufen des Fensters mit den Druckereigenschaften gehen Sie auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten vor.

- Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung]. Wählen Sie [Drucker]. Wählen Sie das UP-GR700-Druckersymbol, klicken Sie anschließend in der Symbolleiste auf [Druckeigenschaften auswählen]. Die auf diese Art vorgenommenen Einstellungen werden als Voreinstellungen zum Drucken aus Anwendungen heraus verwendet.
- Im Menü [Datei] Ihrer jeweiligen Anwendung klicken Sie auf den Eintrag zum Konfigurieren von Druckereinstellungen. Die so vorgenommenen Einstellungen sind nur bis zum Beenden der Anwendung gültig.

In diesem Abschnitt sind die in den Registerkarten der [Druckeinstellungen für UP-GR700] verfügbaren Einstellungen beschrieben.

Registerkarte [Layout]

In dieser Registerkarte werden grundlegende Druckereinstellungen festgelegt.

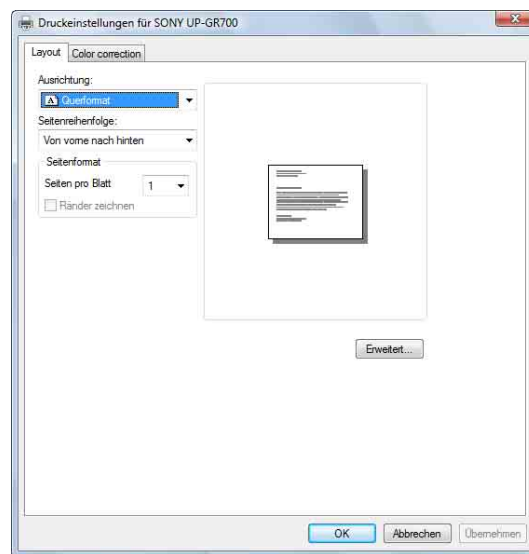

Ausrichtung

Wählen Sie [Hochformat] oder [Querformat].

Seitenreihenfolge

Wählen Sie für die Druckreihenfolge entweder [Von vorne nach hinten] oder [Von hinten nach vorne].

Seiten pro Blatt

Wählen Sie die Anzahl der auf jedem Blatt zu druckenden Seiten.

Ränder zeichnen


Aktiviert, wenn [Seiten pro Blatt] auf mindestens 2 eingestellt ist. Diese Option klicken Sie an, wenn Seitenränder gedruckt werden sollen.

Erweitert

Klicken Sie hierauf, um das Fenster [Erweiterte Optionen] einzublenden.

Registerkarte [Color correction]

Mit Hilfe dieser Registerkarte können Sie Einstellungen zu Farben, Helligkeit und anderen Bildparametern vornehmen.

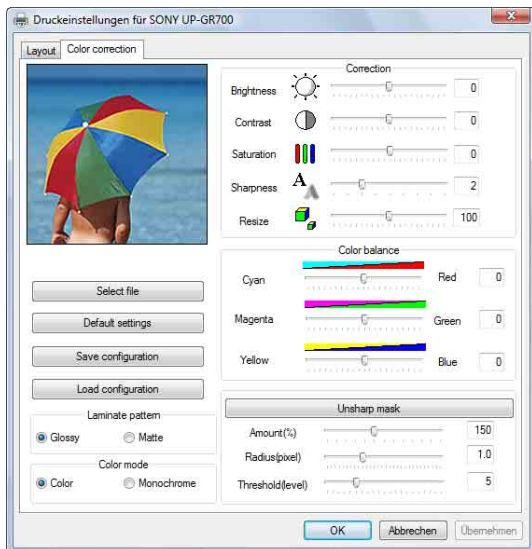

Select file

Klicken Sie hierauf, um das oben links im Fenster angezeigte Bild auszuwählen.

Hinweise

- Als Bildformat können Sie nur Bitmap-Dateien in 24-Bit-Farbe wählen. Die Bildgröße ist nicht beschränkt.
- Im Fenster wird ein Bereich von 256 × 256 Punkten aus der Mitte des gewählten Bildes angezeigt.

Default settings

Klicken Sie hierauf, um alle veränderten Einstellungen auf der Registerkarte [Color correction] auf deren Voreinstellungswerte zurückzusetzen.

Save configuration

Klicken Sie hierauf, um die Konfiguration der Registerkarte [Color correction] in einer Datei zu speichern.

Load configuration

Klicken Sie hierauf, um eine gespeicherte Konfiguration der Registerkarte [Color correction] wiederherzustellen.

Laminate pattern

Wählen Sie für die Oberflächenbeschaffenheit entweder [Glossy] oder [Matte].

Color mode

Wählen Sie als Farbmodus [Color] oder [Monochrome].

Correction

Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Bild vor. Stellen Sie die Werte der einzelnen Parameter (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness und Resize) ein, indem Sie die jeweiligen Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Sie können Zahlenwerte auch direkt in die Eingabefelder eintragen.

Color balance

Stellen Sie die einzelnen Werte ein, indem Sie die entsprechenden Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Sie können auch Zahlenwerte direkt in die Eingabefelder eingeben.


Unsharp mask

Klicken Sie hierauf, um die Unschärfemaske zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Stellen Sie bei aktivierter unsharp mask die Parameter (Amount, Radius und Threshold) ein, indem Sie die jeweiligen Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Sie können Zahlenwerte auch direkt in die Eingabefelder eintragen.

Fenster [Erweiterte Optionen]

Dieses Fenster verwenden Sie, um Dokumenteinstellungen wie Papiergröße, Anzahl der Exemplare und Mehrfachblatlayout vorzunehmen.

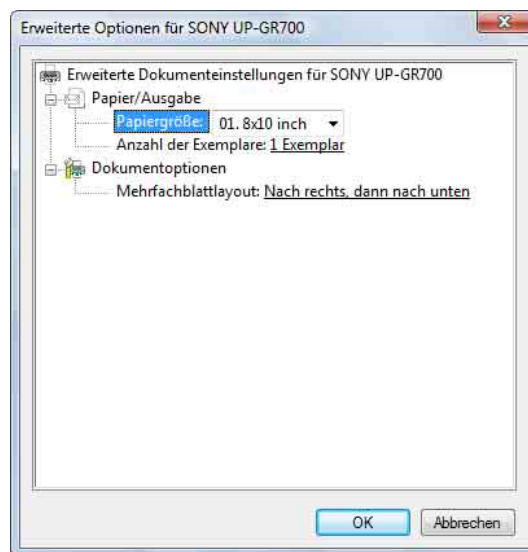

Papiergröße

Wählen Sie als Papierformat zum Drucken [01. 8×10 inch], [02. 8×12 inch], [03. 8×8 inch], [04. 8×5 inch×2], [05. 8×6 inch×2] oder [06. 8×4 inch×3].

Hinweis

Wenn Sie [05. 8×6 inch×2] oder [06. 8×4 inch×3] auswählen, entspricht die tatsächliche Druckgröße etwa 8×5,9 inch×2 bzw. 8×3,87 inch×3.

Anzahl der Exemplare

Klicken Sie hierauf, um die Anzahl zu druckender Exemplare zwischen 1 und 20 einzustellen.

Sortiert

Legen Sie fest, ob Dokumentseiten beim Druck mehrerer Exemplare aufeinanderfolgend oder jeweils einzeln in der gewünschten Zahl gedruckt werden sollen.

Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn der Wert für [Anzahl der Exemplare] auf eine Zahl zwischen 2 und 20 eingestellt wurde.

Mehrfachblattlayout

Wählen Sie als Layout der zu druckenden Seiten [Nach rechts, dann nach unten], [Nach unten, dann nach rechts], [Nach links, dann nach unten] oder [Nach unten, dann nach links] aus.

Druckertreiber unter Windows XP installieren

Vor der Installation

Hinweise zu Versionsaktualisierungen

Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen, entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den neuen installieren.


Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers siehe Abschnitt „Druckertreiber unter Windows XP deinstallieren“ in dieser Anleitung.


Wird die Installation abgebrochen oder schlägt sie fehl, starten Sie den Computer vor der erneuten Installation neu.

Hinweis

Starten Sie nach der Installation oder Deinstallation des Druckertreibers den Computer neu. Andernfalls kann es zu instabilem Betriebsverhalten kommen.

USB 2.0-Verbindung

Der Drucker UP-GR700 ist mit USB 2.0 kompatibel. Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht USB 2.0-kompatibel ist, wird beim Anschließen eines Druckers UP-GR700 die nachfolgend dargestellte Meldung angezeigt. Klicken Sie auf , um die Meldung zu schließen.

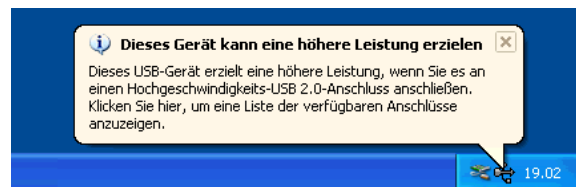

Hinweis zu Treibersignaturen

Der Druckertreiber hat den Windows-Logo-Test nicht durchlaufen, daher wird ggf. bei der Installation eine Fehlermeldung angezeigt, durch welche die Installation zunächst angehalten wird.

Wählen Sie im Dialogfeld [Treibersignaturoptionen] im Bereich [Wie soll Windows vorgehen?] entweder [Ignorieren] oder [Warnen]. Wenn Sie [Sperren] wählen, wird der Druckertreiber nicht installiert.



So öffnen Sie das Dialogfeld [Treibersignaturoptionen]:

- ① Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung].
- ② Doppelklicken Sie auf [System].
Das Dialogfenster [Systemeigenschaften] wird angezeigt.
- ③ Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].
- ④ Klicken Sie auf [Treibersignierung].

Alle Erläuterungen dieser Anleitung setzen voraus, dass die Einstellung [Warnen] gewählt ist.

Mehrere Drucker anschließen

Wenn mehrere Drucker UP-GR700 an einen Computer mit Windows XP angeschlossen sind, installieren Sie den Treiber jedes Druckers entsprechend den Hinweisen unter „Installation unter Windows XP“.

Hinweis

Installieren Sie die nachfolgenden Drucker jeweils einzeln.

Installation unter Windows XP

- 1 Schließen Sie den Drucker UP-GR700, dessen Treiber installiert werden soll, einzeln an.
- 2 Schalten Sie den Drucker UP-GR700 ein.
- 3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Der [Assistent für das Suchen neuer Hardware] wird eingeblendet.



- Wenn die Anzeige des [Assistent für das Suchen neuer Hardware] der Abbildung unter Schritt 3 entspricht, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Wenn die Anzeige des [Assistent für das Suchen neuer Hardware] nicht der Abbildung unter Schritt 3 entspricht, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- Wird der [Assistent für das Suchen neuer Hardware] nicht angezeigt, schließen Sie den Drucker UP-GR700, dessen Treiber installiert werden soll, an den Computer an, schalten den Drucker ein und gehen wie nachfolgend beschrieben vor. (Andere USB-Drucker oder zuvor installierte Drucker UP-GR700 dürfen hierzu nicht angeschlossen sein.)

- ① Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung].
- ② Doppelklicken Sie auf [System].
Das Dialogfenster [Systemeigenschaften] wird angezeigt.
- ③ Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].
- ④ Klicken Sie auf [Geräte-Manager].
Das [Geräte-Manager]-Fenster wird angezeigt.
- ⑤ Klicken Sie links vom Eintrag [USB-Controller] auf [+].

- ⑥ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [USB-Druckerunterstützung], und öffnen Sie die Eigenschaften. Stellen Sie sicher, dass als [Ort] der Eintrag [UP-GR700] angezeigt wird. Wählen Sie dann aus dem Menü [Aktion] den Befehl [Deinstallieren].


- ⑦ Starten Sie den Computer neu.
Der [Assistent für das Suchen neuer Hardware] wird eingeblendet.

- 4 Klicken Sie auf [Nein, diesmal nicht] und danach auf [Weiter].



- 5 Wählen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)], und klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird angezeigt.

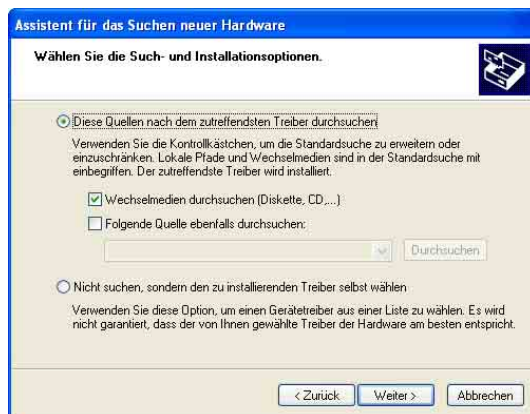

- 6 Wählen Sie [Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen] und [Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD...)], und legen Sie dann die mitgelieferte CD-ROM „PRINTER DRIVER & INSTRUCTIONS FOR USE UP-GR700“ in das CD-ROM-Laufwerk ein.

- 7 Klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird angezeigt.



- 8 Klicken Sie auf [Installation fortsetzen].

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird das nachfolgend abgebildete Fenster angezeigt.



- 9 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

- 10 Starten Sie den Computer neu.

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.


Druckertreiber unter Windows XP deinstallieren

In diesem Abschnitt wird die Deinstallation des Druckertreibers beschrieben.

Hinweise


- Wenn der Deinstallationsvorgang gestartet wird, darf der UP-GR700 nicht am Computer angeschlossen sein. Wird der [Assistent für das Suchen neuer Hardware] angezeigt, trennen Sie die Kabelverbindung zwischen UP-GR700 und Computer. Klicken Sie in allen angezeigten Fenstern auf [Abbrechen], um den Assistenten zu beenden. Starten Sie dann die Deinstallation erneut.
- Wird der Deinstallationsvorgang auf mehrere Instanzen des installierten Druckertreibers angewandt, so werden alle Treiber für die Drucker UP-GR700 (Druckersymbole) deinstalliert.
- Falls die Warnung „The specified printer driver is currently in use.“ angezeigt wird, starten Sie den Computer neu, und führen Sie den Deinstallationsvorgang erneut aus.

- 1 Schalten Sie den Drucker UP-GR700 aus, und trennen Sie die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker.
- 2 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.
- 3 Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung]. Wählen Sie dann [Drucker und Faxgeräte].

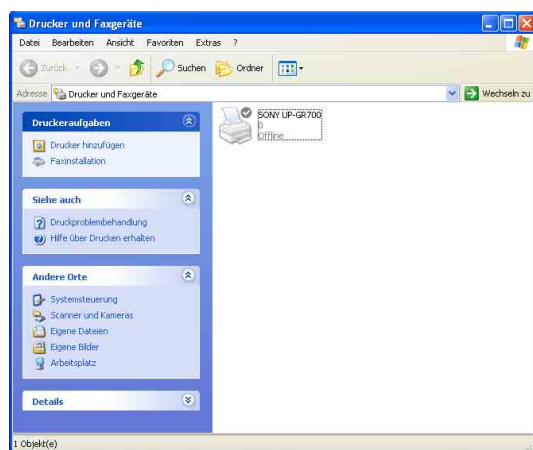


- 4 Wählen Sie den Namen des zu löschenden Druckers aus, und wählen Sie dann aus dem Menü [Datei] den Befehl [Löschen] aus.

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird angezeigt.

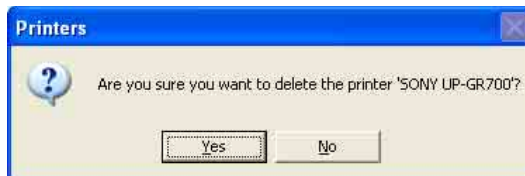


- 5 Klicken Sie auf [Yes].
- 6 Wählen Sie aus dem Menü [Datei] den Befehl [Servereigenschaften].

Das Fenster [Eigenschaften von Druckserver] wird eingeblendet.

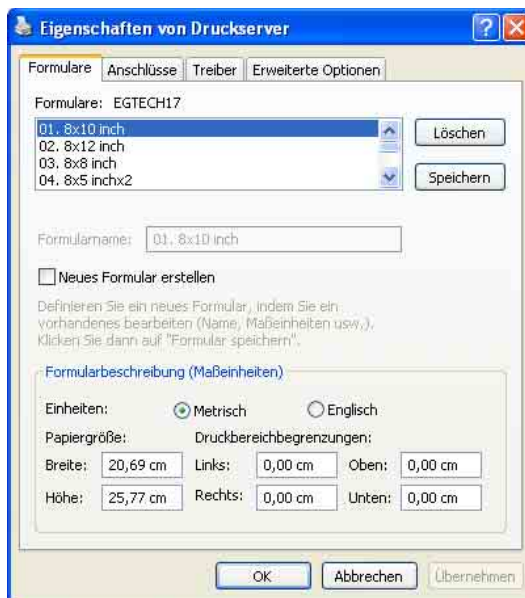

- 7 Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber], wählen Sie den Namen des zu löschenden Druckers aus der Liste [Installierte Druckertreiber], und klicken Sie dann auf [Entfernen].

Das nachfolgend dargestellte Dialogfeld wird eingeblendet.

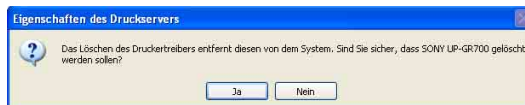

- 8 Klicken Sie auf [Ja].

- 9 Klicken Sie im Fenster [Eigenschaften von Druckserver] auf [OK].

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.

Drucker unter Windows XP konfigurieren

Bevor Sie aus einer Anwendung heraus drucken, müssen Sie einige Druckereinstellungen vornehmen.


Zum Aufrufen des Fensters mit den Druckereigenschaften gehen Sie auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten vor.

- Klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung]. Wählen Sie [Drucker und Faxgeräte]. Markieren Sie das Druckersymbol UP-GR700, und wählen Sie aus dem Menü [Datei] den Eintrag [Drucker anhalten]. Die auf diese Art vorgenommenen Einstellungen werden als Voreinstellungen zum Drucken aus Anwendungen heraus verwendet.
- Im Menü [Datei] Ihrer jeweiligen Anwendung klicken Sie auf den Eintrag zum Konfigurieren von Druckereinstellungen. Die so vorgenommenen Einstellungen sind nur bis zum Beenden der Anwendung gültig.

In diesem Abschnitt sind die in den Registerkarten der [Druckeinstellungen für SONY UP-GR700] verfügbaren Einstellungen beschrieben.

Registerkarte [Layout]

In dieser Registerkarte werden grundlegende Druckereinstellungen festgelegt.

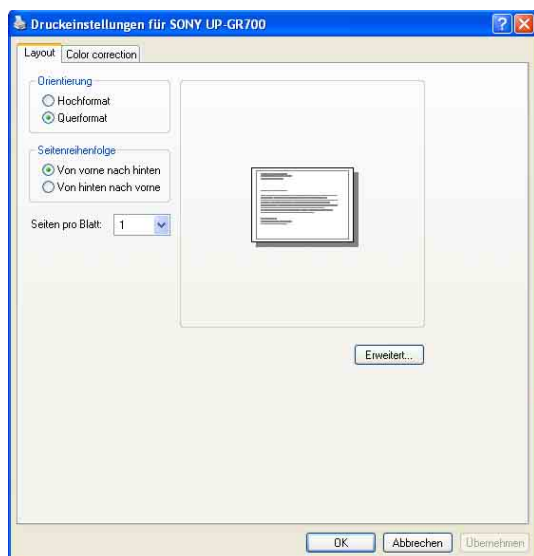

Orientierung

Wählen Sie [Hochformat] oder [Querformat].

Seitenreihenfolge

Wählen Sie für die Druckreihenfolge entweder [Von vorne nach hinten] oder [Von hinten nach vorne].

Seiten pro Blatt


Wählen Sie die Anzahl der auf jedem Blatt zu druckenden Seiten.

Erweitert

Klicken Sie hierauf, um das Fenster [Erweiterte Optionen] einzublenden.

Registerkarte [Color correction]

Mit Hilfe dieser Registerkarte können Sie Einstellungen zu Farben, Helligkeit und anderen Bildparametern vornehmen.

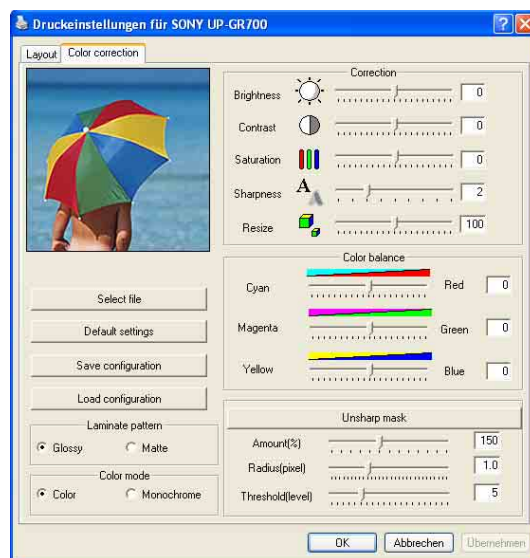

Select file

Klicken Sie hierauf, um das oben links im Fenster angezeigte Bild auszuwählen.

Hinweise

- Als Bildformat können Sie nur Bitmap-Dateien in 24-Bit-Farbe wählen. Die Bildgröße ist nicht beschränkt.
- Im Fenster wird ein Bereich von 256 × 256 Punkten aus der Mitte des gewählten Bildes angezeigt.

Default settings

Klicken Sie hierauf, um alle veränderten Einstellungen auf der Registerkarte [Color correction] auf deren Voreinstellungswerte zurückzusetzen.

Save configuration

Klicken Sie hierauf, um die Konfiguration der Registerkarte [Color correction] in einer Datei zu speichern.

Load configuration

Klicken Sie hierauf, um eine gespeicherte Konfiguration der Registerkarte [Color correction] wiederherzustellen.

Laminate pattern

Wählen Sie für die Oberflächenbeschaffenheit entweder [Glossy] oder [Matte].

Color mode

Wählen Sie als Farbmodus [Color] oder [Monochrome].

Correction

Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Bild vor. Stellen Sie die Werte der einzelnen Parameter (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness und Resize) ein, indem Sie die jeweiligen Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Sie können Zahlenwerte auch direkt in die Eingabefelder eintragen.

Color balance

Stellen Sie die einzelnen Werte ein, indem Sie die entsprechenden Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Sie können auch Zahlenwerte direkt in die Eingabefelder eingeben.

Unsharp mask

Klicken Sie hierauf, um die Unschärfemaske zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Stellen Sie bei aktivierter unsharp mask die Parameter (Amount, Radius und Threshold) ein, indem Sie die jeweiligen Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Sie können Zahlenwerte auch direkt in die Eingabefelder eintragen.

Fenster [Erweiterte Optionen]

Dieses Fenster wird dazu verwendet, um Dokumenteinstellungen wie Papierformat und Exemplaranzahl vorzunehmen.



Papiergröße

Wählen Sie als Papierformat zum Drucken [01. 8x10 inch], [02. 8x12 inch], [03. 8x8 inch], [04. 8x5 inchx2], [05. 8x6 inchx2] oder [06. 8x4 inchx3].

Hinweis

Wenn Sie [05. 8x6 inchx2] oder [06. 8x4 inchx3] auswählen, entspricht die tatsächliche Druckgröße etwa 8x5,9 inchx2 bzw. 8x3,87 inchx3.

Anzahl der Exemplare

Klicken Sie hierauf, um die Anzahl zu druckender Exemplare zwischen 1 und 20 einzustellen.

Sortiert

Legen Sie fest, ob Dokumentseiten beim Druck mehrerer Exemplare aufeinanderfolgend oder jeweils einzeln in der gewünschten Zahl gedruckt werden sollen.


Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn der Wert für [Anzahl der Exemplare] auf eine Zahl zwischen 2 und 20 eingestellt wurde.

Informationen zum bedruckbaren Bereich

Beim Drucken mit dem UP-GR700 entsteht um die Bilddaten herum ein Rand von etwa 1,9 mm (22 Punkte), der nicht bedruckt werden kann. Berücksichtigen Sie diesen Rand entsprechend bei der Vorbereitung Ihres Ausdrucks. Wenn Sie zwei oder drei Bilder auf eine Seite drucken, müssen Sie diese Bilder entsprechend anordnen und als eine einzige Druckseite zum Drucker senden.

Ein Bild drucken

Ein Bild pro Seite wird gedruckt. Wenn Sie auf diese Weise drucken, stellen Sie das Bild auf die Größe (C x D) ein - siehe nachstehende Abbildung und Tabelle. Die tatsächliche Größe des Ausdrucks entspricht A x B.

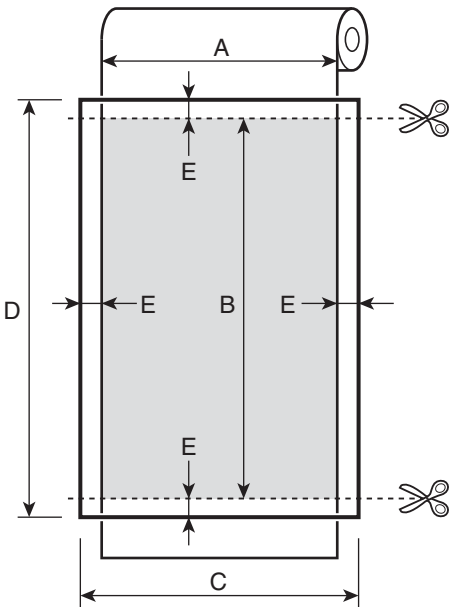

A/B/C/D : Siehe Tabelle.
E : 22 Punkte


| Papiergrößeein- stellung | Bildgröße (A x B) | Bildgröße (C x D) |
|-----------------------------|---|----------------------|
| [01. 8x10 inch] | 203 x 254 mm (8 x 10 Zoll) (2400 x 3000 Punkte) | 2444 x 3044 Punkte |
| [02. 8x12 inch] | 203 x 305 mm (8 x 12 Zoll) (2400 x 3600 Punkte) | 2444 x 3644 Punkte |
| [03. 8x8 inch] | 203 x 203 mm (8 x 8 Zoll) (2400 x 2400 Punkte) | 2444 x 2444 Punkte |

Zwei Bilder drucken

Zwei Bilder pro Seite werden gedruckt. Sie müssen die beiden Bilder entsprechend anordnen und als eine einzige Druckseite zum Drucker senden. Stellen Sie die Bildgröße (C x D) gemäß der nachstehenden Abbildung/Tabelle ein. Die tatsächliche Größe des Ausdrucks entspricht A x B.

Hinweis

Zwischen den Bildern muss etwas Freiraum (16 Punkte, in der Abbildung durch F gekennzeichnet) verbleiben. An dieser Stelle wird nichts gedruckt, auch wenn sich dort Bilddaten befinden sollten.

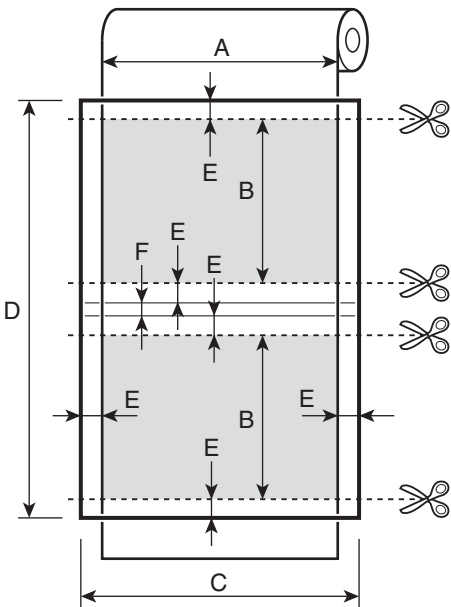

A/B/C/D : Siehe Tabelle.
E : 22 Punkte
F : 16 Punkte


| Papiergrößeein- stellung | Bildgröße (A x B) | Bildgröße (C x D) |
|-----------------------------|--|----------------------|
| [04. 8x5 inchx2] | 203 x 127 mm (8 x 5 Zoll) (2400 x 1500 Punkte) | 2444 x 3104 Punkte |
| [05. 8x6 inchx2] | 203 x 150 mm (8 x 5,9 Zoll) (2400 x 1770 Punkte) | 2444 x 3644 Punkte |

Drei Bilder drucken

Drei Bilder pro Seite werden gedruckt. Sie müssen die drei Bilder entsprechend anordnen und als eine einzige Druckseite zum Drucker senden. Stellen Sie die Bildgröße (C × D) gemäß der nachstehenden Abbildung/Tabelle ein. Die tatsächliche Größe des Ausdrucks entspricht A × B.

Hinweis

Zwischen den Bildern muss etwas Freiraum (16 Punkte, in der Abbildung durch F gekennzeichnet) verbleiben. An dieser Stelle wird nichts gedruckt, auch wenn sich dort Bilddaten befinden sollten.

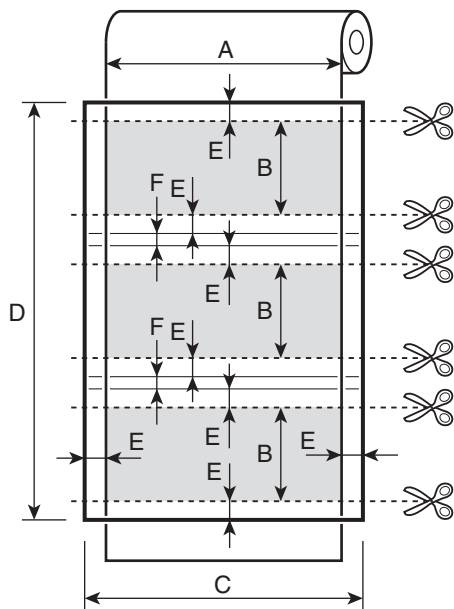

A/B/C/D : Siehe Tabelle.

E : 22 Punkte

F : 16 Punkte

| PapiergröÙeein- stellung | BildgröÙe (A × B) | BildgröÙe (C × D) |
|-----------------------------|---|----------------------|
| [06. 8×4 inch×3] | 203 × 98 mm (8 × 3,87 Zoll) (2400 × 1160 Punkte) | 2444 × 3644 Punkte |