



# ***Printer Driver***

---

## Guida all'installazione

Questa guida descrive l'installazione dei driver stampante per Windows Vista e Windows XP.

### **Prima di usare questo software**

Prima di usare il driver stampante, leggere il file "ReadMe".

## **UP-GR700**

---

# Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Ambiente di utilizzo .....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>Informazioni sul presente documento .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Installazione del driver della stampante in</b> |           |
| <b>Windows Vista .....</b>                         | <b>4</b>  |
| Prima dell'installazione .....                     | 4         |
| Installazione in Windows Vista .....               | 4         |
| Disinstallazione del driver della stampante in     |           |
| Windows Vista .....                                | 7         |
| Configurazione della Stampante in                  |           |
| Windows Vista .....                                | 9         |
| <b>Installazione del Driver della Stampante in</b> |           |
| <b>Windows XP .....</b>                            | <b>11</b> |
| Prima dell'installazione .....                     | 11        |
| Installazione in Windows XP .....                  | 12        |
| Disinstallazione del Driver della Stampante in     |           |
| Windows XP .....                                   | 14        |
| Configurazione della Stampante in                  |           |
| Windows XP .....                                   | 15        |
| <b>Area di Stampa .....</b>                        | <b>17</b> |
| Stampa di Un'Immagine .....                        | 17        |
| Stampa di Due Immagini .....                       | 17        |
| Stampa di Tre Immagini .....                       | 18        |

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Anche altri nomi di società o di prodotto indicati nella presente guida sono marchi o marchi registrati.

## Ambiente di utilizzo

I requisiti di sistema per l'utilizzo del driver stampante sono indicati di seguito.

- Computer con Microsoft Windows Vista (la versione a 64 bit non è supportata) oppure
- Computer con Microsoft Windows XP Professional/Home Edition

### Informazioni su USB 2.0

- L'UP-GR700 è conforme alle specifiche USB 2.0.
- USB 2.0 è completamente completamente compatibile con USB 1.1.
- USB 2.0 supporta il funzionamento a velocità normale (Full) o ad alta velocità (Hi-Speed).
- In ambienti USB 1.1, il collegamento e il funzionamento a velocità normale (Full) è sempre possibile. Per il funzionamento a velocità Hi-Speed, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
  - Computer  
Computer compatibile con USB Hi-Speed (conforme alle specifiche USB 2.0)\*
  - Sistema operativo  
Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XP Professional/Microsoft Windows XP Home Edition
  - Driver USB 2.0  
Driver periferica USB 2.0 prodotto da Microsoft Corporation (non è possibile garantire il funzionamento con driver USB 2.0 diversi.)
  - Cavo USB 2.0 certificato

\* Non è possibile garantire la compatibilità con tutte le periferiche USB 2.0 o schede di espansione USB 2.0.

#### Nota

Quando l'UP-GR700 è collegata ed accesa, assicurarsi che il computer non entri in modalità stand-by o sospensione. In tali casi non è possibile garantire il funzionamento corretto.

## Informazioni sul presente documento

Le descrizioni dell'utilizzo del Pannello di controllo presuppongono l'utilizzo di Windows in Visualizzazione classica. Per passare alla visualizzazione classica, fare clic su [start], selezionare [Pannello di controllo], e fare clic su [Visualizzazione classica] (per Windows Vista) o [Passa alla visualizzazione classica] (per Windows XP) nelle proprietà del Pannello di controllo sul lato sinistro dello schermo.

# Installazione del driver della stampante in Windows Vista

## Prima dell'installazione


### Aggiornamenti di versione


Se si sta aggiornando un driver stampante, rimuovere sempre la versione precedente prima di procedere con l'installazione.

Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire per la rimozione del driver della stampante, fare riferimento alla sezione "Disinstallazione del driver della stampante in Windows Vista" nella presente guida.

Se l'installazione non dovesse essere completata con successo o fosse interrotta, riavviare sempre il computer prima di ripetere nuovamente l'installazione.

### Connessione USB 2.0

L'UP-GR700 è conforme alle specifiche USB 2.0. Tuttavia, se il computer o l'hub USB utilizzati non sono compatibili con USB 2.0, verrà visualizzato il seguente messaggio al collegamento del UP-GR700. Fare clic su  per chiudere il messaggio.

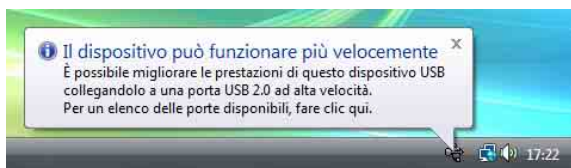

### Connessione di più stampanti

Se sono connesse più stampanti UP-GR700, è sufficiente collegare la seconda e le successive stampanti per avviare automaticamente l'installazione.

#### Nota

Per l'installazione di ulteriori stampanti, installare ciascuna stampante separatamente.


## Driver stampante Windows 2000/Windows XP

Poiché la versione anteriore del driver della stampante per Windows 2000/Windows XP non è compatibile con Windows Vista, non sarà possibile ottenere una stampa ottimale se si installa nel Windows Vista. Se si installa la versione del driver della stampante per Windows 2000/Windows XP nel Windows Vista, seguire i passi descritti nella sezione "Disinstallazione del driver della stampante in Windows Vista" di questo manuale per disinstallare il driver anteriore, quindi installare la versione attuale del driver della stampante compatibile con Windows Vista.

## Installazione in Windows Vista

- 1 Collegare l'UP-GR700 della quale è necessario installare il driver sul computer.
- 2 Accendere l'UP-GR700 collegata.
- 3 Accendere il computer ed eseguire il login come amministratore del sistema o utente appartenente al gruppo Amministratori.

Apparirà la finestra di dialogo [Trovato nuovo hardware].

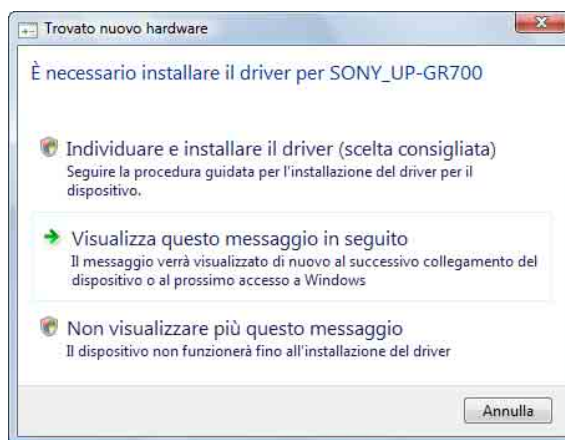


Se la finestra [Trovato nuovo hardware] non appare, eseguire i passi indicati di seguito con l'UP-GR700 per la quale deve essere installato il driver, accesa e collegata al computer. (Eventuali altre stampanti USB o stampanti UP-GR700 già installate non devono essere collegate.)

- ① Fare clic su [start] e selezionare [Pannello di controllo].
- ② Fare doppio clic su [Sistema].
- ③ Fare clic su [Gestione dispositivi].  
Apparirà la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente].
- ④ Fare clic su [Continua].  
Apparirà la finestra [Gestione dispositivi].


- ⑤ Fare clic su [+] sulla sinistra di [Controller USB (Universal Serial Bus)].
- ⑥ Selezionare [Supporto stampa USB], quindi selezionare [Disinstalla] dal menu [Azione].
- ⑦ Riavviare il computer.  
Apparirà la finestra di dialogo [Trovato nuovo hardware].

- 4 Fare clic su [Individuare e installare il driver (scelta consigliata)].

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

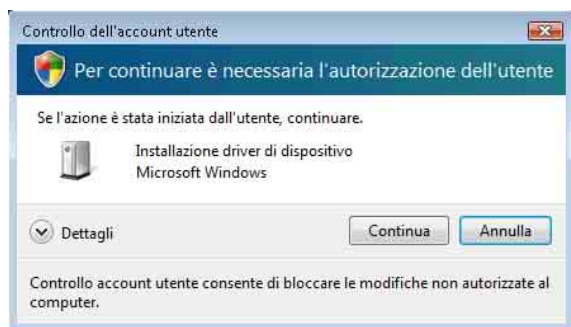

- 5 Fare clic su [Continua].
- 6 Fare clic su [Non cercare in linea] se viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

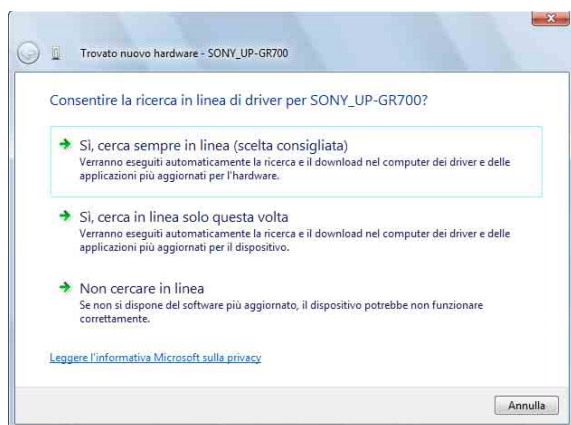

Appare la seguente finestra.




Da questo punto in poi, la procedura varia a seconda che venga utilizzato il CD-ROM fornito o meno (nel caso che il driver sia stato scaricato online).

## Procedura con il CD-ROM fornito

- 7 Inserire nel lettore il CD-ROM fornito.

Appare la seguente finestra.

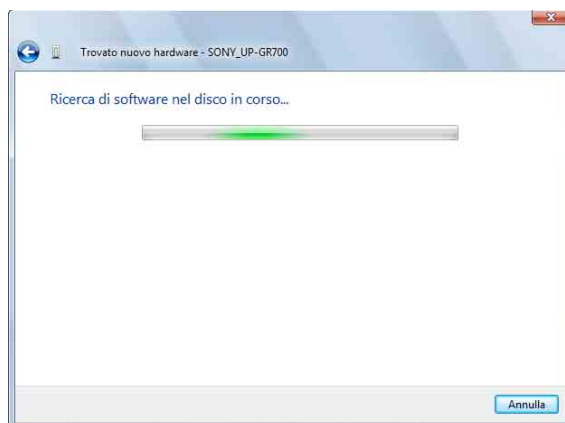

Al termine della ricerca del software, viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.




- 8 Fare clic su [Installa il software del driver].

La finestra di dialogo si chiude e viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo [Trovato nuovo hardware].



Una volta copiati i file, viene visualizzata la finestra seguente.

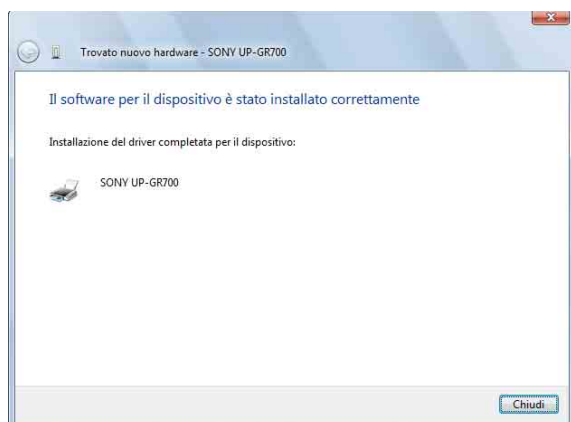


- 9 Fare clic su [Chiudi].

Con ciò termina l'installazione del driver della stampante.

## Procedura senza il CD-ROM fornito


- 7 Fare clic su [Disco non disponibile. Mostra altre opzioni.].

Appare la seguente finestra.

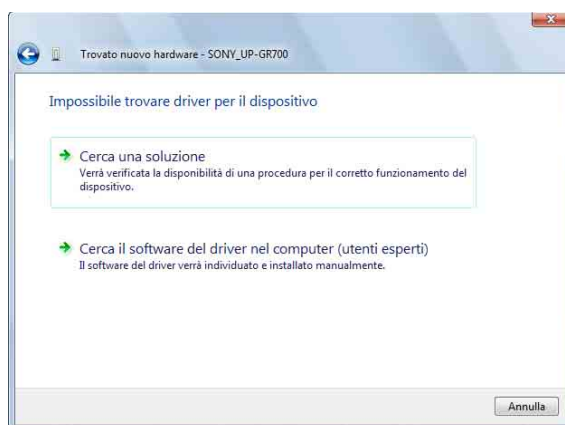

- 8 Fare clic su [Cerca il software del driver nel computer (utenti esperti)].

Appare la seguente finestra.

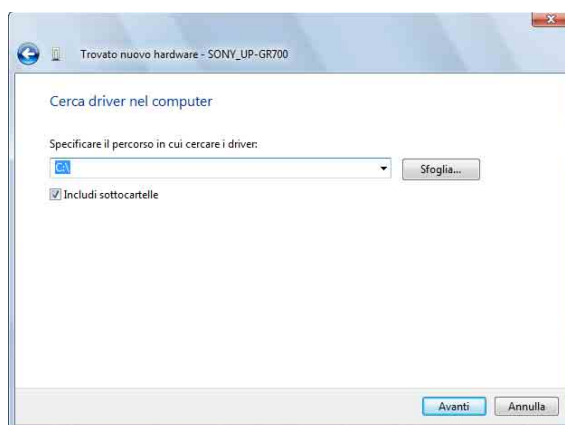

- 9 Fare clic su [Sfoglia] per aprire la finestra di dialogo [Cerca cartella]. Specificare la cartella in cui il file di installazione è stato estratto dopo il download, quindi fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo [Cerca cartella].


## 10 Fare clic su [Avanti].

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.




## 11 Fare clic su [Installa il software del driver].

La finestra di dialogo si chiude e viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo [Trovato nuovo hardware].

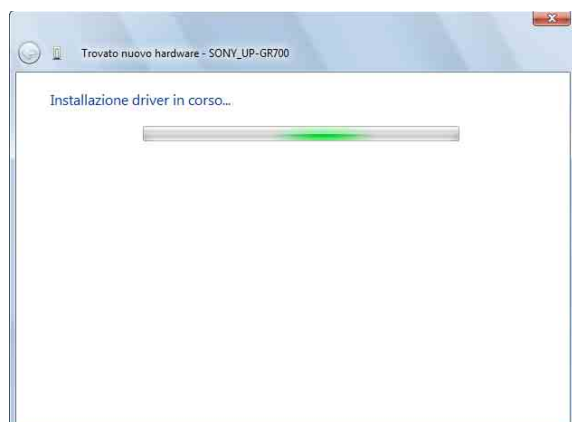

Una volta copiati i file, viene visualizzata la finestra seguente.

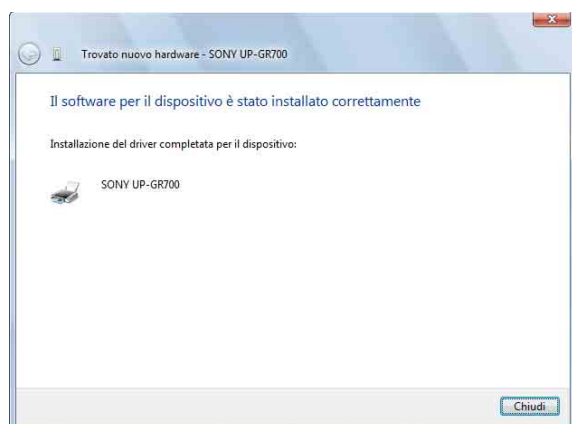

## 12 Fare clic su [Chiudi].

Con ciò termina l'installazione del driver della stampante.

## Disinstallazione del driver della stampante in Windows Vista


Questa sezione descrive come rimuovere il driver della stampante.

### Note


- All'avvio della procedura di disinstallazione, l'UP-GR700 non deve essere collegata al computer. Se appare la finestra [Trovato nuovo hardware], scollegare il cavo fra l'UP-GR700 ed il computer, fare clic su [Annulla] in tutte le finestre per terminare la procedura d'installazione guidata, e quindi riavviare la procedura di disinstallazione.
- Se la procedura di disinstallazione è eseguita quando sono installate più istanze del driver della stampante, tutti i driver delle UP-GR700 (icone stampanti) saranno rimossi.

1 Fare clic su [start], selezionare [Pannello di controllo], quindi selezionare [Stampanti].

2 Con il tasto destro del mouse fare clic sul nome della stampante che si vuole eliminare per aprire il menu delle opzioni, quindi fare clic su [Elimina].

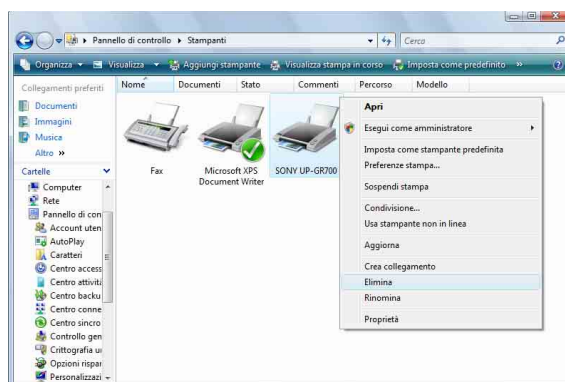


Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

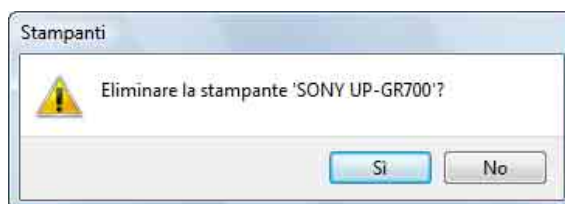

3 Fare clic su [Sì].



- 4 Con il tasto destro del mouse fare clic su qualunque punto della finestra (eccetto le icone delle stampanti) per visualizzare il menu delle opzioni, selezionare [Esegui come amministratore], quindi fare clic su [Proprietà server].

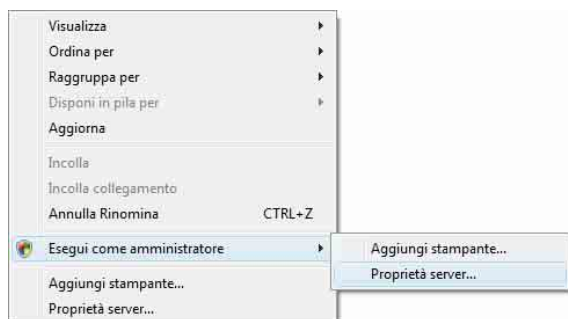


Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.



- 5 Fare clic su [Continua].

Si visualizzano le proprietà del server.

- 6 Fare clic sulla scheda [Driver], selezionare il nome della stampante che si vuole eliminare dall'elenco [Driver della stampante installati], quindi fare clic su [Rimuovi].

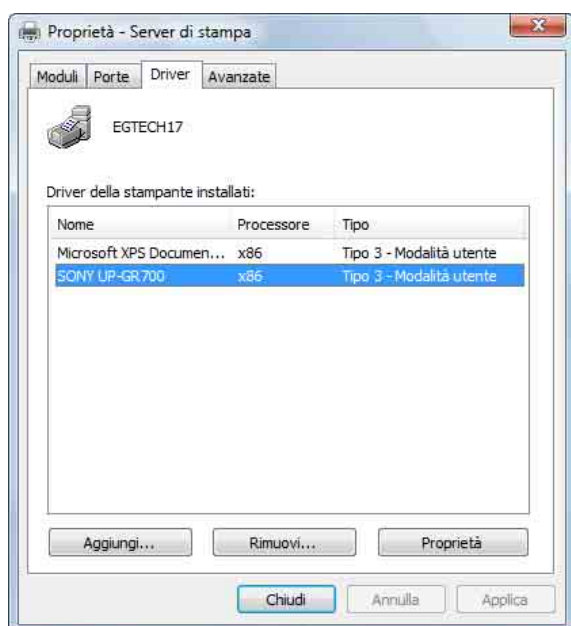


Appare la finestra [Rimuovi driver e pacchetto].



- 7 Selezionare [Rimuovi driver e pacchetto driver.], quindi fare clic su [OK].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

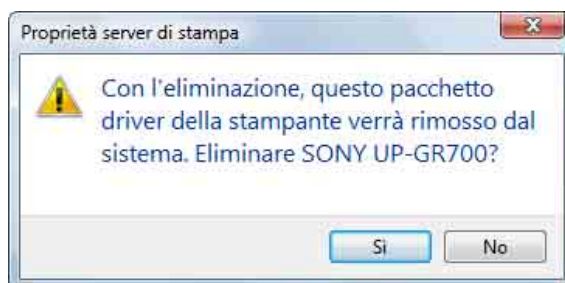

- 8 Fare clic su [Sì].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.





## 9 Fare clic su [Elimina].

Appare la seguente finestra.



## 10 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra.

### Nota

Il messaggio di allerta [Il driver della stampante è già in uso.] potrebbe apparire. Se appare questo messaggio, riavviare il computer ed eseguire nuovamente la procedura di disinstallazione.

## Configurazione della Stampante in Windows Vista

Prima di poter stampare da un'applicazione, è necessario effettuare le necessarie impostazioni delle proprietà della stampante.


Aprire la finestra delle proprietà della stampante con uno dei seguenti metodi.

- Fare clic su [start] e quindi [Pannello di controllo]. Selezionare [Stampanti]. Selezionare l'icona dell'UP-GR700, quindi fare clic su [Selezionare la preferenze di stampa] sulla barra degli strumenti. Le impostazioni effettuate con questo metodo sono utilizzate come impostazioni predefinite nella stampa dalle varie applicazioni.
- Nel menu [File] dell'applicazione, fare clic sulla voce per l'impostazione della stampante. Le impostazioni effettuate con questo metodo rimangono attive solo fino all'uscita dall'applicazione.

Questa sezione descrive le impostazioni disponibili nelle varie schede della finestra [Preferenze stampa UP-GR700].

### Scheda [Layout]

Questa scheda consente di effettuare le principali impostazioni di stampa.

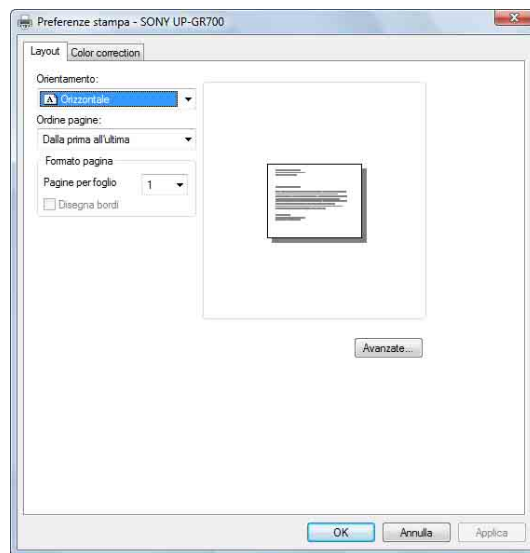

### Orientamento

Selezionare [Verticale] o [Orizzontale].

### Ordine pagine

Selezionare [Dalla prima all'ultima] oppure [Dall'ultima alla prima] per l'ordine di esecuzione delle stampe.

## Pagine per foglio

Selezionare il numero di pagine da stampare su ciascun foglio.

## Disegna bordi


Abilitato quando [Pagine per foglio] è impostato su 2 o più pagine. Fare clic se i margini necessitano di essere adattati alle pagine.

## Avanzate

Consente di visualizzare la finestra [Opzioni avanzate].

## Scheda [Color correction]

Questa scheda consente di variare le impostazioni di colore, luminosità e altri parametri relativi all'immagine.

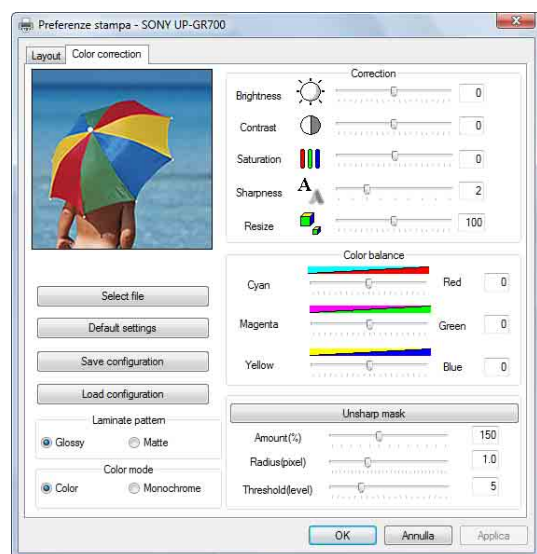

## Select file

Consente di selezionare l'immagine visualizzata nell'angolo superiore sinistro della finestra.

### Note

- Per il formato dell'immagine è possibile selezionare solo i file bitmap a colori a 24 bit. Le dimensioni dell'immagine non prevedono limiti.
- La finestra visualizza un'area da 256 × 256 a partire dal centro dell'immagine selezionata.

## Default settings

Consente di riportare sui valori predefiniti tutte le impostazioni modificate nella scheda [Color correction].

## Save configuration

Consente di salvare come file la configurazione della scheda [Color correction].

## Load configuration

Consente di ripristinare una configurazione salvata per la scheda [Color correction].

## Laminate pattern

Selezionare [Glossy] oppure [Matte] per la patinatura.

## Color mode

Selezionare [Color] o [Monochrome] per la modalità del colore.

## Correction

Consente di apportare modifiche all'immagine. Regolare le voci (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness e Resize) spostando a destra o sinistra i relativi cursori. È anche possibile immettere direttamente dei valori nei campi di immissione.

## Color balance

Regolare i valori spostando i rispettivi cursori verso destra o sinistra. È possibile immettere i valori anche direttamente nelle caselle.


## Unsharp mask

Consente di attivare o disattivare la maschera di contrasto.

Quando unsharp mask è attivata, adattare le voci (Amount, Radius e Threshold) spostando a destra o sinistra i relativi cursori. È anche possibile immettere direttamente dei valori nei campi di immissione.

## Finestra [Opzioni avanzate]

Questa finestra viene utilizzata per eseguire impostazioni del documento quali formato, numero copie e layout pagine per foglio.

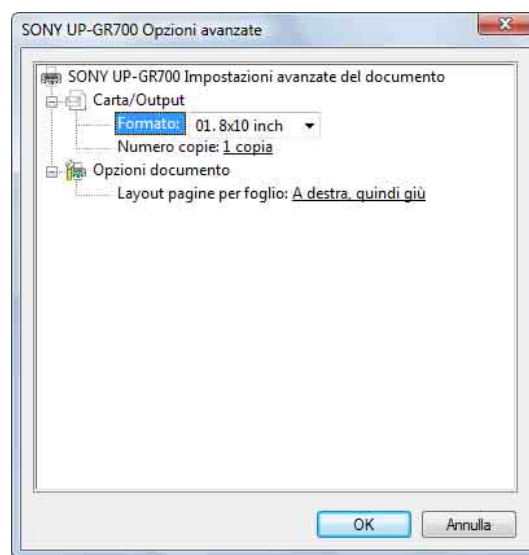

## Formato

Selezionare [01. 8×10 inch], [02. 8×12 inch], [03. 8×8 inch], [04. 8×5 inch×2], [05. 8×6 inch×2] o [06. 8×4 inch×3] come dimensioni del foglio per la stampa.

### Nota

Se si selezionano [05. 8×6 inch×2] o [06. 8×4 inch×3], le dimensioni del foglio per la stampa saranno rispettivamente approssimativamente 8×5,9 inch×2 e 8×3,87 inch×3.

### Numero copie

Consente di impostare il numero di copie da stampare, tra 1 e 20.

### Fascicolate

Quando si esegue la stampa di più copie, consente di impostare la stampa di pagine fascicolate oppure stampate singolarmente.

Questa voce è attivata solo quando [Numero copie] è impostato tra 2 e 20.

### Layout pagine per foglio

Selezionare [A destra, quindi giù], [Giù, quindi a destra], [A sinistra, quindi giù], o [Giù, quindi a sinistra] come layout delle pagine da stampare.

# Installazione del Driver della Stampante in Windows XP

## Prima dell'installazione

### Aggiornamenti di versione

Se si sta aggiornando un driver stampante, rimuovere sempre la versione precedente prima di procedere con l'installazione.

Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire per la rimozione del driver della stampante, fare riferimento alla sezione “Disinstallazione del Driver della Stampante in Windows XP” nella presente guida.


Se l'installazione non dovesse essere completata con successo o fosse interrotta, riavviare sempre il computer prima di ripetere nuovamente l'installazione.


### Nota

Riavviare sempre il computer al termine dell'installazione o disinstallazione del driver stampante. Se il computer non viene riavviato, il funzionamento può non essere stabile.

## Connessione USB 2.0

La stampante UP-GR700 è compatibile USB 2.0.

Tuttavia, se il computer o l'hub USB utilizzati non sono compatibili con USB 2.0, verrà visualizzato il seguente messaggio al collegamento della stampante UP-GR700. Fare clic su  per chiudere il messaggio.

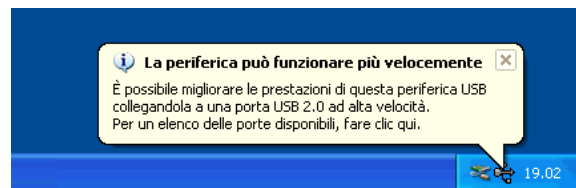

## Opzioni firma driver

Il driver stampante corrente non ha superato il testing del programma Windows Logo. Per tale ragione, al momento dell'installazione può essere visualizzato un messaggio di errore che ne impedisce l'installazione. Nella finestra di dialogo [Opzioni firma driver] selezionare [Ignora] o [Richiedi sempre la scelta dell'azione.] nel riquadro [Scegliere una delle seguenti opzioni]. Se si sceglie [Blocca] non sarà possibile installare il driver stampante.



Aprire la finestra di dialogo [Opzioni firma driver] come segue:

- ① Nel menu [start], fare clic su [Pannello di controllo].
- ② Fare doppio clic su [Sistema].  
Apparirà la finestra di dialogo [Proprietà del sistema].
- ③ Fare clic sulla scheda [Hardware].
- ④ Fare clic sul pulsante [Firma driver].

Tutte le spiegazioni della presente guida presuppongono che in questa finestra di dialogo sia stato selezionato [Richiedi sempre la scelta dell'azione.].

## Connessione di più stampanti

Se sono connesse più stampanti UP-GR700 a un computer con Windows XP, installare il driver di stampa di ciascuna stampante come descritto in "Installazione in Windows XP".

### Nota

Per l'installazione di ulteriori stampanti, installare ciascuna stampante separatamente.

## Installazione in Windows XP

- 1 Collegare la stampante UP-GR700 (solo una) della quale è necessario installare il driver sul computer.
- 2 Accendere la stampante UP-GR700 collegata.
- 3 Accendere il computer ed eseguire il login come amministratore del sistema o utente appartenente al gruppo Amministratori.

Apparirà la finestra [Installazione guidata nuovo hardware].




- Se la finestra [Installazione guidata nuovo hardware] è simile a quella mostrata al passo 3, procedere con il passo 4.
- Se la finestra [Installazione guidata nuovo hardware] è diversa da quella mostrata al passo 3, procedere con il passo 5.
- Se la finestra [Installazione guidata nuovo hardware] non appare, eseguire i passi indicati di seguito con la stampante UP-GR700 per la quale deve essere installato il driver accesa e collegata al computer. (Eventuali altre stampanti USB o stampanti UP-GR700 già installate non devono essere collegate).

- ① Fare clic su [start] e selezionare [Pannello di controllo].
- ② Fare doppio clic su [Sistema].  
Apparirà la finestra di dialogo [Proprietà del sistema].
- ③ Fare clic sulla scheda [Hardware].
- ④ Fare clic su [Gestione periferiche].  
Apparirà la finestra [Gestione periferiche].
- ⑤ Fare clic su [+] sulla sinistra di [Controller USB (Universal Serial Bus)].


- ⑥ Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Supporto stampa USB] ed aprire la finestra delle proprietà. Confermare che in [Ubicazione] sia selezionato [UP-GR700], quindi selezionare [Disinstalla] dal menu [Azione].
- ⑦ Riavviare il computer.  
Apparirà la finestra dell' [Installazione guidata nuovo hardware].

- 4 Fare clic su [No, non ora], quindi fare clic su [Avanti].

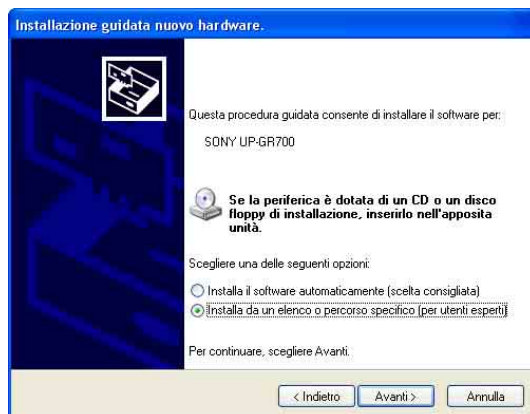

- 5 Selezionare [Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)] quindi fare clic su [Avanti].

Appare la seguente finestra.

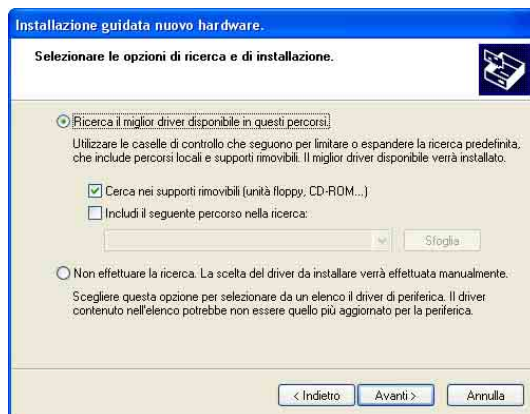

- 6 Selezionare [Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi.], selezionare [Cerca nei supporti rimovibili (unità floppy, CD-ROM...)], e quindi inserire nel lettore il CD-ROM fornito "PRINTER DRIVER & INSTRUCTIONS FOR USE UP-GR700".

- 7 Fare clic su [Avanti].

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.



- 8 Fare clic su [Continua].

Una volta copiati i file, viene visualizzata la finestra seguente.



- 9 Fare clic su [Fine].

- 10 Riavviare il computer.

Con ciò termina l'installazione del driver della stampante.




## Disinstallazione del Driver della Stampante in Windows XP

Questa sezione descrive come rimuovere il driver della stampante.

### Note


- All'avvio della procedura di disinstallazione, l'UP-GR700 non deve essere collegata al computer. Se appare la finestra [Installazione guidata nuovo hardware], scollegare il cavo fra l'UP-GR700 ed il computer, fare clic su [Annulla] in tutte le finestre per terminare la procedura d'installazione guidata, e quindi riavviare la procedura di disinstallazione.
- Se la procedura di disinstallazione è eseguita quando sono installate più istanze del driver della stampante, tutti i driver delle stampanti UP-GR700 (icone stampante) saranno rimossi.
- Se viene visualizzato l'avviso "The specified printer driver is currently in use.", riavviare il computer ed eseguire di nuovo la procedura di disinstallazione.

- 1 Spegnere la stampante UP-GR700 e scollegare il cavo fra la stampante e il computer.
- 2 Accendere il computer ed eseguire il login come amministratore del sistema o utente appartenente al gruppo Amministratori.
- 3 Fare clic su [start] e selezionare [Pannello di controllo]. Selezionare [Stampanti e fax].

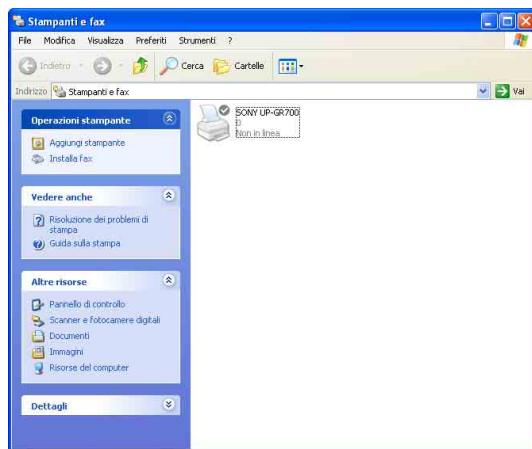

- 4 Selezionare il nome della stampante da eliminare, quindi selezionare [Elimina] dal menu [File].


Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

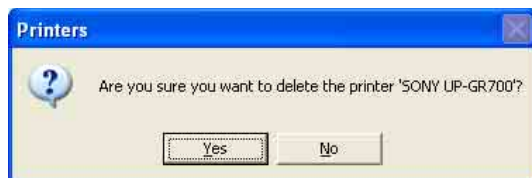

- 5 Fare clic su [Yes].


- 6 Selezionare [Proprietà server] dal menu [File].

Viene visualizzata la finestra [Proprietà-Server di stampa].

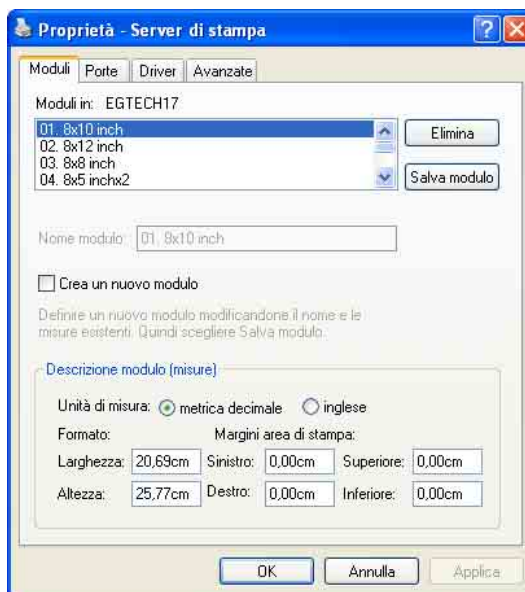

- 7 Fare clic sulla scheda [Driver], selezionare il nome della stampante da eliminare nell'elenco [Driver della stampante installati], quindi fare clic su [Rimuovi].

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

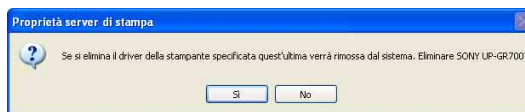

- 8 Fare clic su [Sì].

- 9 Fare clic su [OK] nella finestra [Proprietà-Server di stampa].

Con questo è completata la procedura di disinstallazione del driver della stampante.

## Configurazione della Stampante in Windows XP

Prima di poter stampare da un'applicazione, è necessario effettuare le necessarie impostazioni delle proprietà della stampante.


Aprire la finestra delle proprietà della stampante con uno dei seguenti metodi.

- Fare clic su [start] e quindi [Pannello di controllo]. Selezionare [Stampanti e fax]. Selezionare l'icona della stampante UP-GR700, quindi fare clic su [Sospendi stampa] nel menu [File]. Le impostazioni effettuate con questo metodo sono utilizzate come impostazioni predefinite nella stampa dalle varie applicazioni.
- Nel menu [File] dell'applicazione, fare clic sulla voce per l'impostazione della stampante. Le impostazioni effettuate con questo metodo rimangono attive solo fino all'uscita dall'applicazione.

Questa sezione descrive le impostazioni disponibili nelle varie schede della finestra [Preferenze stampa UP-GR700].

### Scheda [Layout]

Questa scheda consente di effettuare le principali impostazioni di stampa.

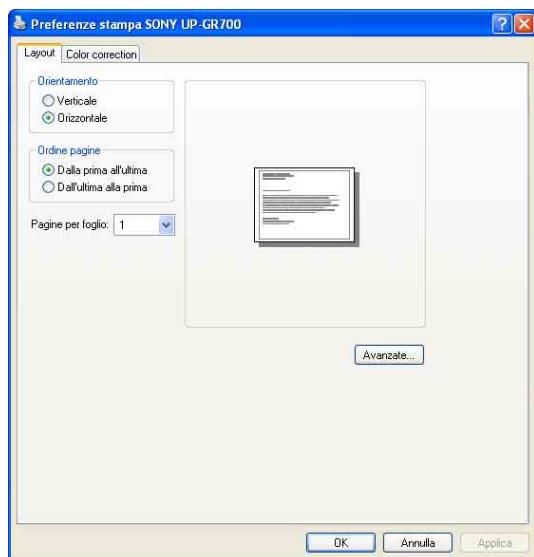

#### Orientamento

Selezionare [Verticale] o [Orizzontale].

#### Ordine pagine

Selezionare [Dalla prima all'ultima] oppure [Dall'ultima alla prima] per l'ordine di esecuzione delle stampe.

### Pagine per foglio


Selezionare il numero di pagine da stampare su ciascun foglio.

### Avanzate

Consente di visualizzare la finestra [Opzioni avanzate].

### Scheda [Color correction]

Questa scheda consente di variare le impostazioni di colore, luminosità e altri parametri relativi all'immagine.

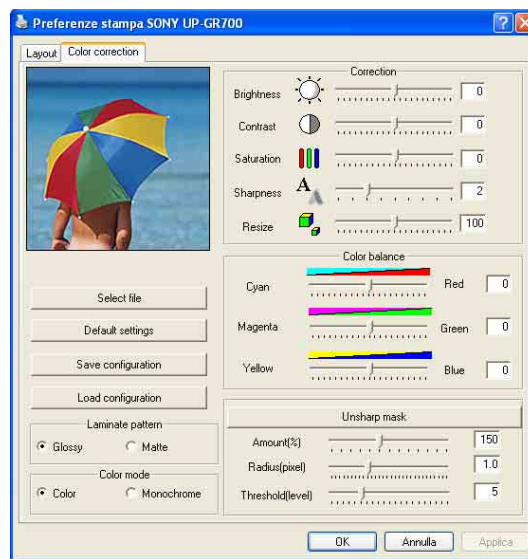

#### Select file

Consente di selezionare l'immagine visualizzata nell'angolo superiore sinistro della finestra.

#### Note

- Per il formato dell'immagine è possibile selezionare solo i file bitmap a colori a 24 bit. Le dimensioni dell'immagine non prevedono limiti.
- La finestra visualizza un'area da 256 x 256 a partire dal centro dell'immagine selezionata.

#### Default settings

Consente di riportare sui valori predefiniti tutte le impostazioni modificate nella scheda [Color correction].

#### Save configuration

Consente di salvare come file la configurazione della scheda [Color correction].

#### Load configuration

Consente di ripristinare una configurazione salvata per la scheda [Color correction].

#### Laminate pattern

Selezionare [Glossy] oppure [Matte] per la patinatura.



### Color mode

Selezionare [Color] o [Monochrome] per la modalità del colore.

### Correction

Consente di apportare modifiche all'immagine. Regolare le voci (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness e Resize) spostando a destra o sinistra i relativi cursori. È anche possibile immettere direttamente dei valori nei campi di immissione.

### Color balance

Regolare i valori spostando i rispettivi cursori verso destra o sinistra. È possibile immettere i valori anche direttamente nelle caselle.

### Unsharp mask

Consente di attivare o disattivare la maschera di contrasto.

Quando unsharp mask è attivata, adattare le voci (Amount, Radius e Threshold) spostando a destra o sinistra i relativi cursori. È anche possibile immettere direttamente dei valori nei campi di immissione.

## Finestra [Opzioni avanzate]

Questa finestra viene utilizzata per eseguire impostazioni del documento quali le dimensioni del foglio e il numero di copie.



### Formato

Selezionare [01. 8x10 inch], [02. 8x12 inch], [03. 8x8 inch], [04. 8x5 inchx2], [05. 8x6 inchx2] o [06. 8x4 inchx3] come dimensioni del foglio per la stampa.

### Nota

Se si selezionano [05. 8x6 inchx2] o [06. 8x4 inchx3], le dimensioni del foglio per la stampa saranno rispettivamente approssimativamente 8x5,9 inchx2 e 8x3,87 inchx3.

### Numero copie

Consente di impostare il numero di copie da stampare, tra 1 e 20.

### Fascicolate

Quando si esegue la stampa di più copie, consente di impostare la stampa di pagine fascicolate oppure stampate singolarmente.


Questa voce è attivata solo quando [Numero copie] è impostato tra 2 e 20.

# Area di Stampa

Per stampare con UP-GR700, l'area circostante al dato immagine sarà diminuito di circa 1,9 mm (22 dots). Preparare l'immagine da stampare in modo che ci sia spazio per l'area da rimuovere.  
Per stampare due o tre immagini, è necessario allinearle e prepararle come una solo dato immagine.

## Stampa di Un'Immagine

Stampa un'immagine. Impostare l'immagine nella dimensione (C x D) come indicato nella figura/tabella sottostante. Il formato attuale da stampare è A x B.

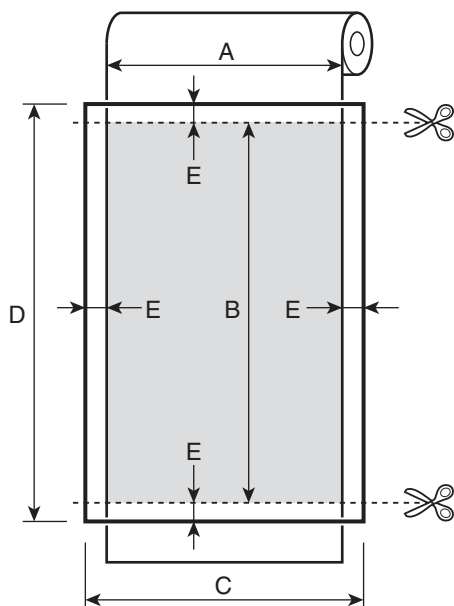

A/B/C/D : Consultare la tabella  
E : 22 dots


| Impostazione<br>Dimensione<br>Foglio | Dimensione<br>disegno<br>(A x B)                       | Dimensione<br>immagine<br>(C x D) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| [01. 8x10 inch]                      | 203 x 254 mm<br>(8 x 10 pollici)<br>(2400 x 3000 dots) | 2444 x 3044 dots                  |
| [02. 8x12 inch]                      | 203 x 305 mm<br>(8 x 12 pollici)<br>(2400 x 3600 dots) | 2444 x 3644 dots                  |
| [03. 8x8 inch]                       | 203 x 203 mm<br>(8 x 8 pollici)<br>(2400 x 2400 dots)  | 2444 x 2444 dots                  |

## Stampa di Due Immagini

Stampa due immagini alla volta. Allineare e preparare le due immagini come un solo dato immagine. Impostare l'immagine nella dimensione (C x D) come indicato nella figura/tabella sottostante. Il formato attuale da stampare è A x B.

### Nota

Tra ogni immagine sono richiesti degli spazi bianchi (16 dots) (mostrati dalla lettera F in figura). Non verrà stampato nulla nonostante gli spazi contengano dei dati.

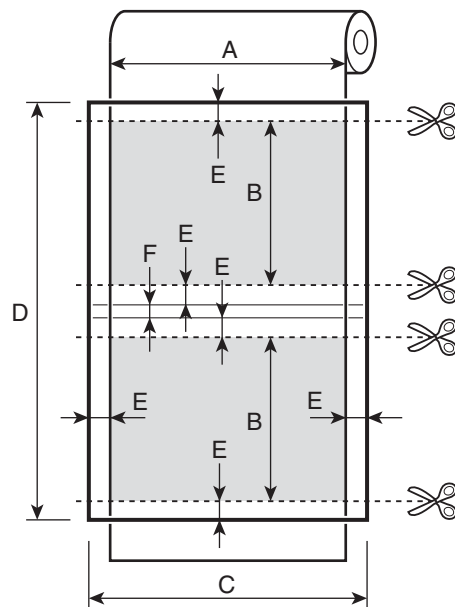

A/B/C/D : Consultare la tabella.  
E : 22 dots  
F : 16 dots


| Impostazione<br>Dimensione<br>Foglio | Dimensione<br>Disegno<br>(A x B)                        | Dimensione<br>Immagine<br>(C x D) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| [04. 8x5 inchx2]                     | 203 x 127 mm<br>(8 x 5 pollici)<br>(2400 x 1500 dots)   | 2444 x 3104 dots                  |
| [05. 8x6 inchx2]                     | 203 x 150 mm<br>(8 x 5,9 pollici)<br>(2400 x 1770 dots) | 2444 x 3644 dots                  |

# Stampa di Tre Immagini

Stampa tre immagini alla volta. Allineare e preparare le tre immagini come un solo dato immagine. Impostare l'immagine nella dimensione (C x D) come indicato nella figura/tabella sottostante. Il formato attuale da stampare è A x B.

**Nota**

Tra ogni immagine sono richiesti degli spazi bianchi (16 dots) (mostrati dalla lettera F in figura). Non verrà stampato nulla nonostante gli spazi contengano dei dati.

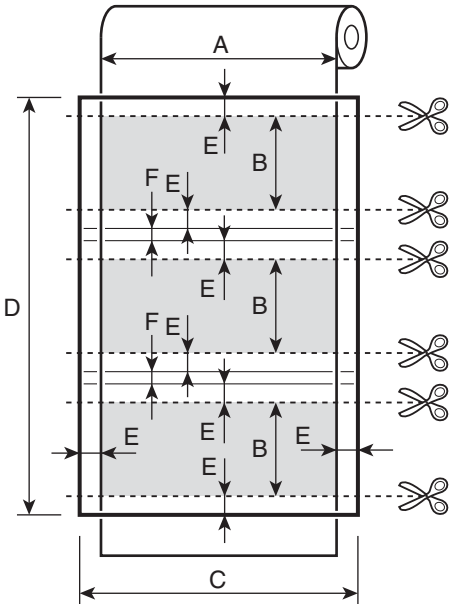

A/B/C/D : Consultare la tabella.

E : 22 dots

F : 16 dots

| Impostazione<br>Dimensione<br>Foglio | Dimensione<br>disegno<br>(A x B)                        | Dimensione<br>Immagine<br>(C x D) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| [06. 8x4 inchx3]                     | 203 x 98 mm<br>(8 x 3,87 pollici)<br>(2400 x 1160 dots) | 2444 x 3644 dots                  |